

Luna-Wing

Керамонаполненный композит для не прямых реставраций



Усадка всего 1,8%



Низкий уровень насыщения
влажностью и высокая
устойчивость к окрашиванию




Высокая прочность
и износостойкость



Натуральная эстетика
и флуоресценция



Биологическая безопасность
подтверждена испытаниями

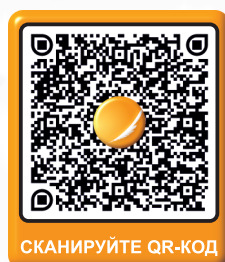

С полной палитрой
оттенков Luna-Wing
вы можете ознако-
миться по QR-коду



КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ YAMAKIN

Основные шаги послойного нанесения




- 1** Нанесите праймер и Невидимый опак + полимеризация

Multi Primer PASTE




- 2** Нанесите Опак Оpaque + полимеризация

Opaque

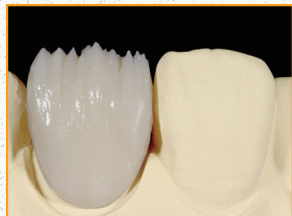

- 3** Нанесите Дентин Dentine + полимеризация

Dentine

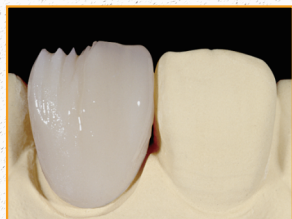

- 4** Нанесите Эмаль Enamel HS + полимеризация

Enamel




- 5** Полировка и глазурирование

Polisher



- 6** Финиш

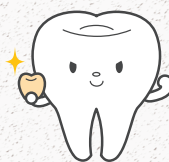

MultiPrimer

Серия праймеров

Бондинг для нанесения композитов на сплавы Multi Primer PASTE



Бондинг для нанесения композитов на сплавы и диоксид циркония Multi Primer Liquid



Бондинг для коррекции светоотверждаемых композитов и работы с PMMA Multi Primer REPAIR LIQUID ONE



СВОЙСТВА МАТЕРИАЛОВ
КЛИНИЧЕСКИ ДОКАЗАНЫ



ОПЫТ ПРОИЗВОДСТВА
БОЛЕЕ 50 ЛЕТ



ПРИЗНАНО ЗУБНЫМИ
ТЕХНИКАМИ РФ



Дентал-Ист

Официальный дистрибьютор
материалов YAMAKIN в России

ЗАПРОСИТЕ
ПОЛНЫЙ
КАТАЛОГ
И ОБРАЗЦЫ



СКАНИРУЙТЕ QR-КОД



+7 (499) 745 63-20



www.dental-east.ru



shop@dental-east.ru



YAMAKIN - НОВОЕ СЛОВО В ИСКУССТВЕ
СОЗДАНИЯ ЭСТЕТИЧЕСКИХ РЕСТАВРАЦИЙ



ЯПОНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ