



СДЕЛАНО В ЯПОНИИ



YAMANASHI
DENTAL MFG. CO.

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

2026

КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ.
ТЕХНОЛОГИИ, СОЗДАНЫЕ В ЯПОНИИ.



35 лет надёжных поставок и современных стоматологических решений в России

Директор компании «Дентал-Ист»

Здравствуйте, уважаемые клиенты и партнёры!

Компания «Дентал-Ист» более 35 лет успешно работает на стоматологическом рынке России. Мы объединяем передовые технологии, качественные материалы и профессиональный опыт, обеспечивая клиники и лаборатории современными решениями по доступным ценам. Нам удалось построить устойчивую репутацию надежного поставщика. Долгосрочное сотрудничество с ведущими производителями Японии и Южной Кореи заложило основу качеству и доступности продукции, которую мы предлагаем нашим клиентам.

Собственная зуботехническая лаборатория и фрезерный центр проводят испытания всех новинок, прежде чем мы выводим их на рынок. Оказывает услуги изготовления протезов любой сложности из современных материалов.

Мы сотрудничаем с известными международными лекторами. Их опыт позволяет повышать квалификацию врачей стоматологов и зубных техников. Для этого мы регулярно организуем различные учебные мероприятия: от вебинаров до мастер-классов. Мы активно взаимодействуем с учебными заведениями, обеспечивая их научно-практической базой, повышая качество образования.

Сервисная служба, которая осуществляет гарантийное и послепродажное обслуживание, помогает создавать понятные инструкции для пользователей.

За эти годы нам удалось подготовить не одно поколение опытных менеджеров, которые постоянно стажировались и накапливают опыт, чтобы общаться с клиентами на одном языке.

Наша компания работает как с клиентами из России, так и из Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.

Наш приоритет - подобрать оптимальное решение для наших клиентов в кратчайшие сроки с минимальными затратами и оказать всестороннюю поддержку.



Афанасьев Алексей Николаевич

Продукция



Головной офис компании



Проводим учебные курсы



Участвуем в выставках



СОДЕРЖАНИЕ

История компании YAMANACHI

Представление и история компании Yamahachi ----- стр. 2-3

Акриловые и композитонаполненные искусственные зубы

Однослойные и двухслойные акриловые зубы ----- стр. 4-11

Трёхслойные акриловые зубы ----- стр. 12-16

Трёхслойные композитонаполненные зубы ----- стр. 17-21

Бондинг для фиксации зубов в съёмных протезах

Re-Fine EX (Liquid) PRIMER - бондинг на основе акрилового поликарбоната ----- стр. 22

Термопластмассы

Basis - пластмасса для термоинжекционного литья ----- стр. 24

Полировочные материалы

Полировочные материалы для обработки пластмасс ----- стр. 25

Расходные материалы

Расходные материалы для работы с термопластмассами ----- стр. 26

Синтетическая пластмасса

Синтетическая пластмасса ----- стр. 27-32

CAD/CAM заготовки

Акриловые CAD/CAM заготовки ----- стр. 33-34

Восковые CAD/CAM заготовки ----- стр. 35

Воска

Воска литьевые и моделировочные ----- стр. 36-39

Полировочные инструменты и материалы

Абразивные полировочные инструменты и материалы ----- стр. 40-44

Отрезные и полировочные диски

Отрезные и полировочные диски ----- стр. 45

Сепарационные и чистящие средства

Сепарационные и чистящие средства ----- стр. 46-48



YAMAHACHI DENTAL MFG., CO.

Компания	Ямагачи Дентал МФГ (YAMAHACHI DENTAL MFG., CO.)
Адрес	54-1 Очигара Нишиура-Cho, Гамагори, префектура Аичи, Япония. (54-1 OCHIGARA NISHIURA-CHO, GAMAGORY-CITY, AICHI PREF, JAPAN)
Телефон/факс	*81-533-57-7121/*81-533-57-1764
Президент	Масаши Тояма (Masashi Toyama)
Основание компании	Ноябрь 1958
Регистрация бренда	
Yamahachi Dental	Февраль 1963
Численность персонала	80
Расположение и офисы:	Головной офис: Гамагори Филиал: Токио
Заводы:	Северный завод, Завод в Катахаре, Завод в Китае.

Продукция: Искусственные зубы, материалы для базисных протезов, ортодонтии, самополимеризующиеся пластмассы, воск, термоинжекционные материалы, абразивные/полирующие материалы, стоматологические сплавы, артикуляторы, гипсы, паковочные материалы, гуттаперчевые штифты, сепарационные материалы, чистящие материалы, импланты.

История компании YAMAHACHI

1958	Начало производства пластмассовых зубов.	1999	Компания удостоена поддержки генеральным директором Агенства Науки и Технологии.
1963	Регистрация бренда YAMAHACHI DENTAL MFG., CO.		Завод в Китае получает разрешение JIS (японские промышленные стандарты).
1979	JIS (японские промышленные стандарты) разрешение выдано главному заводу.	2000	Присвоен стандарт международной организации по стандартизации ISO 9001.
1983	Главный офис переехал на текущий адрес.	2001	Заводу в Китае присвоен стандарт ISO 9002.
1984	Открыта фабрика по производству Au-Pd сплавов.	2004	Сертифицированы как бренд, компании Аичи (префектура Аичи).
1985	Начато производство гидроксиапатитных цемента.	2005	Получен стандарт ISO 13485
1988	Открытие завода в Катахара.	2006	Письмо благодарности от министерства Экономики, Торговли и Индустрии (Вручалось 300 лучшим малым и средним предприятиям).
1990	Производство светоотверждаемых пластмасс.	2007	Открытие офисов продаж в Китае (Пекин, Шанхай, Сучжоу).
1991	Производство новой керамики.	2008	Открытие офисов продаж в Китае (Гуаньчжоу).
1992	Открытие завода в Китае.	2009	Основан имплантологический центр (Гамагори, Япония).
1998	Получено почетное признание за композитные зубы от Японского института изобретений и инноваций. Компания удостоена поддержки Агенством малого и среднего предпринимательства (за производство и внедрение композитных зубов).		

История компании YAMANACHI

Компания YAMANACHI DENTAL, в 2023 году отмечает 60-ти летний юбилей своей деятельности в сфере зуботехники. Мы достигли больших успехов в поставках высококачественных материалов для зубных техников и заслужили доверие наших заказчиков в Японии и по всему миру.


Компания YAMANACHI производит искусственные пластмассовые зубы, акриловые пластмассы, зуботехнические воска и гуттаперчевые штифты наряду с другими продуктами для зубных техников. Основные продукты - зубы искусственные пластмассовые (композитные и акриловые). Компания имеет долю 30% от общих продаж данного вида товаров на рынке Японии, и искренне гордится своей отличной репутацией, заслуженной у своих заказчиков.

В дополнение к этому, компания импортирует в Японию высококачественную зуботехническую

продукцию из других стран и, в тоже время, реализует продукцию собственного производства почти в 60 стран мира.

Специалисты выбирают продукцию YAMANACHI благодаря надежности ее качества, сертификации ISO 9001 :2008 и ISO 13485:2003 (сертификаты вручены в 2005 году). Также продукция YAMANACHI имеет знак соответствия европейским техническим регламентам (CE mark), и мы уверены, что Вы и Ваши клиенты будут более чем удовлетворены качеством и надежностью продуктов YAMANACHI. Компания YAMANACHI будет и в дальнейшем постоянно стремиться поставлять своим заказчикам инновационные и усовершенствованные продукты, одновременно способствуя развитию отрасли зуботехники и обеспечению своих клиентов продукцией отличного качества.

Завод YAMANACHI DENTAL MFG., CO.



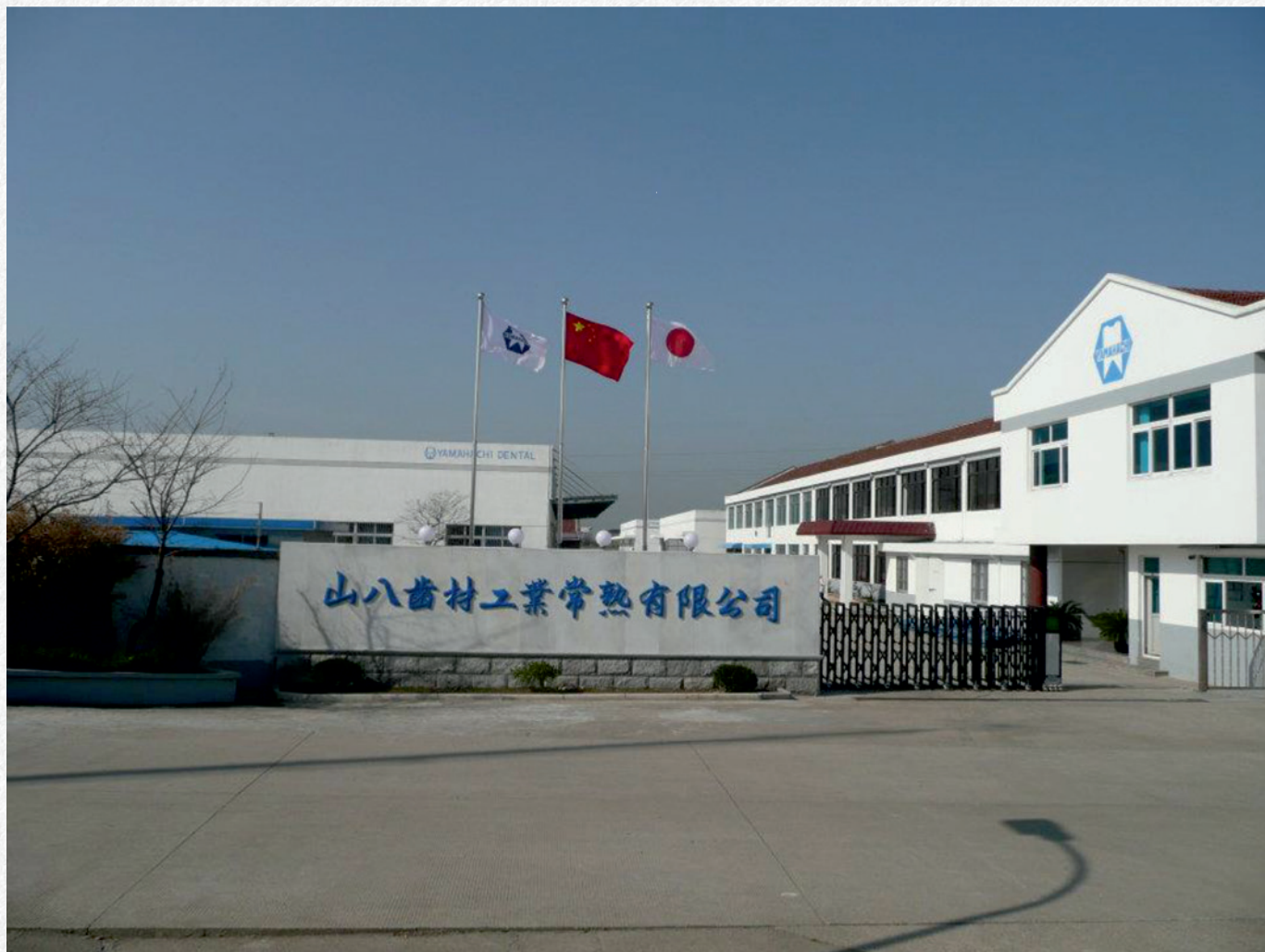


ДВУХСЛОЙНЫЕ АКРИЛОВЫЕ ЗУБЫ СЕРИЙ NEW ACE / NAPERCE

Акриловые смолы широко используются в качестве составных компонентов при производстве искусственных зубов. Они образуются в результате химической реакции между инициатором полимеризации и мономером под воздействием тепла. Полиметилметакрилат (PMMA), который получают из мономера метилметакрилата (MMA), образует химическую связь с базисом зубного протеза, поскольку они изготовлены из одного материала. Ему можно придать различную форму и оттенок.


В современном мире люди стали более осознанно относиться к своему здоровью и, следовательно, с большим вниманием подходить к выбору акриловых зубов для зубных протезов. Поэтому мы начали разрабатывать акриловые зубы серий New Ace и Naperce, которые соответствуют стандартам высокого качества и отвечают растущим потребностям рынка. Благодаря многолетнему опыту в производстве искусственных зубов и строгому соблюдению стандартов качества, нам удалось удовлетворить новые требования рынка. Первостепенное внимание мы уделили эстетике: тщательно прорабатывали каждый слой и градиент каждого зуба, чтобы добиться естественной формы, оттенка и прозрачности.

Благодаря своим уникальным физическим свойствам, акриловые зубы серий New Ace и Naperce идеально подходят для создания функциональных зубных протезов. Это позволяет нам уверенно представлять нашу японскую технологию на стремительно развивающемся рынке стоматологических материалов.

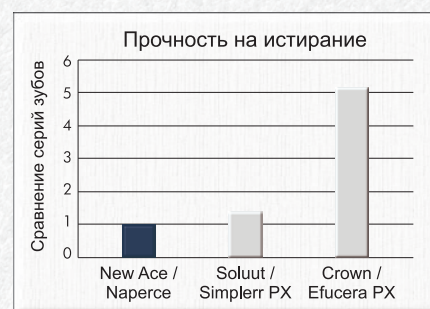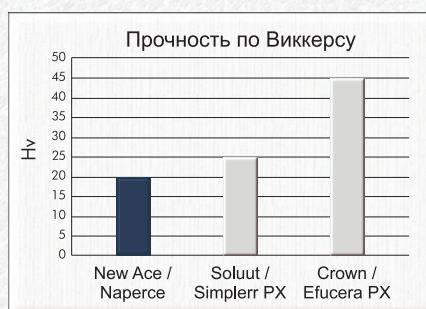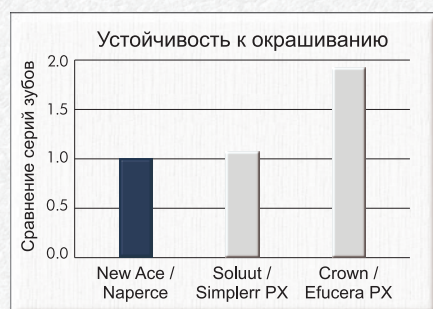

Чтобы воссоздать индивидуальные особенности формы, размера и цвета конкретного типа зубов, мы разработали широкий спектр форм и оттенков, которые всегда доступны. Каждый из параметров разработан таким образом, чтобы воспроизвести естественный внешний вид и функциональность натуральных зубов. При помощи реалистичного мамелона и эффекта флуоресценции мы постарались передать физические особенности улыбки. В то время как особенности выравнивания зубов направлены на воссоздание естественного ощущения зубов во рту, их окклюзия идеально адаптирована для имитации естественного процесса жевания.

Палитра оттенков акриловых зубов серий New Ace / Naperce

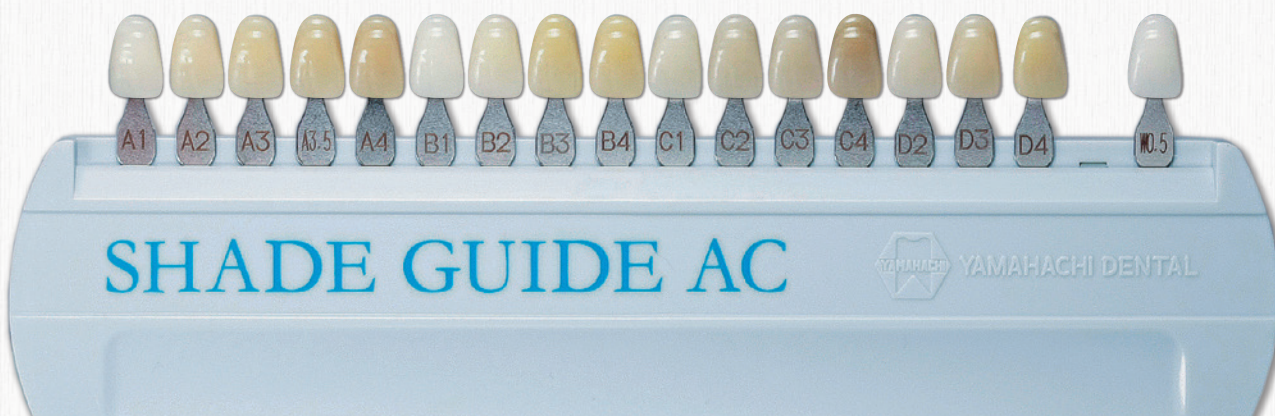

ОТТЕНКИ 17 различных оттенков по шкале VITA: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4, W0.5

⚠ При заказе ориентируйтесь по оттенку и фасону.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в спецификацию, дизайн, ценообразование моделей и элементов комплектации, проиллюстрированных и описанных в этой публикации, в любое время, без каких-либо обязательств и предоставления уведомления о таком изменении. Все технические характеристики, указанные здесь, могут отличаться от фактических характеристик продукта. Все сочетания цветов и моделей доступны при условии фактического наличия.

YAMAHACHI DENTAL MFG. CO.



New Ace / Naperce Полный гарнитур



New Ace / Naperce

Акриловые зубы (полный гарнитур - 28 зубов на планке).

New Ace - фронтальные двухслойные акриловые зубы.

Naperce - боковые двухслойные акриловые зубы.

Упаковка:

- планка: 28 зубов.

- коробка: 6 планок (28 зубов на планке).



New Ace Фронтальные



New Ace

Акриловые зубы (фронтальные двухслойные - 6 зубов на планке), верхние или нижние.

Упаковка:

- планка: 6 зубов.

- коробка: 16 планок (6 зубов на планке).



Naperce Боковые




Naperce

Акриловые зубы (боковые двухслойные - 8 зубов на планке), верхние или нижние.

Упаковка:

- планка: 8 зубов.

- коробка: 12 планок (8 зубов на планке).

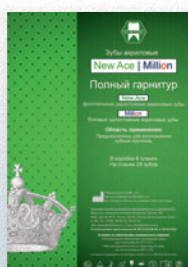

New Ace / Million Полный гарнитур



New Ace / Million

Акриловые зубы (полный гарнитур - 28 зубов на планке).

New Ace - фронтальные двухслойные акриловые зубы.

Million - боковые однослойные акриловые зубы.

Упаковка:

- планка: 28 зубов.

- коробка: 6 планок (28 зубов на планке).



New Ace / Million (20 полных гарнитуров в боксе)



Million Боковые зубы в боксе - верхние 160 шт. - нижние 160 шт.

New Ace / Million

Акриловые зубы в боксе (20 полных гарнитуров - 560 зубов).

New Ace - фронтальные двухслойные акриловые зубы.

Million - боковые однослойные акриловые зубы.

Упаковка:

New Ace: верхние - 120 зубов, нижние - 120 зубов.

Naperce: верхние - 160 зубов, нижние - 160 зубов.

Million

Боковые однослойные акриловые зубы в боксе (320 зубов).

Верхние - 160 зубов, нижние - 160 зубов.



ДВУХСЛОЙНЫЕ АКРИЛОВЫЕ ЗУБЫ СЕРИИ NEW ACE

Фронтальная группа NEW ACE

■ ВЕРХНИЕ

	A	B	C
▲ T1	42,6	7,6	10,4
▲ T2	41,9	7,6	9,9
▲ T3	45,1	8,2	11,4
▲ T4	45,0	8,1	10,7
▲ T5	46,5	8,4	11,3
▲ T6	48,2	8,6	11,6

▲ TL4	44,7	8,5	10,9
▲ TL5	46,9	8,8	11,1
▲ TL6	49,4	9,1	11,7
▲ TL7	51,7	9,5	12,3

▲ S2	43,0	7,7	9,5
▲ S3	43,9	8,1	9,8

■ S4	45,1	8,0	10,6
■ S5	47,5	8,5	10,5
■ S6	47,7	8,8	11,4
■ S7	49,9	9,3	12,6
■ S8	52,3	9,8	12,9

■ SS2	41,9	7,8	9,1
■ SS3	44,3	8,0	9,0

● O2	41,4	7,3	9,3
● O3	44,1	8,0	10,0
● O4	46,6	8,4	10,0
● O5	48,8	8,7	10,4

A	B	C
---	---	---

ОТТЕНКИ 17 различных оттенков по шкале VITA: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4, W0.5

⚠ При заказе ориентируйтесь по оттенку и фасону.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в спецификацию, дизайн, ценообразование моделей и элементов комплектации, проиллюстрированных и описанных в этой публикации, в любое время, без каких-либо обязательств и предоставления уведомления о таком изменении. Все технические характеристики, указанные здесь, могут отличаться от фактических характеристик продукта. Все сочетания цветов и моделей доступны при условии фактического наличия.

YAMAHACHI DENTAL MFG. CO.

АКРИЛОВЫЕ ЗУБЫ СЕРИИ NEW ACE / NAPERCE / MILLION



Фронтальная группа NEW ACE			
НИЖНИЕ		A	B C
L2		32,3	4,9 8,5
L3		32,7	5,1 8,9
L4		33,5	5,3 9,4
L5		32,9	5,2 9,2
L6		33,9	5,2 9,7
L7		36,0	5,5 9,9
L8		36,4	5,5 10,4
L9		37,9	5,8 10,4
L10		40,0	6,1 11,1
L11		41,9	6,4 11,4
S3L		32,6	5,0 8,3
S4L		34,3	5,2 8,7

Таблица соответствия		
Фронтальные	Боковые	
NEW ACE	Naperce	Million
Верхние		
Нижние		
T1 / L2	M30	M30
T2 / L2	M30	M30
T3 / L6	M32	M32
T4 / L4	M30	M30
T5 / L7	M32	M32
T6 / L7	M32	M32
TL4 / L6	M33	M33
TL5 / L8	M33	M33
TL6 / L9(L8)	M33	M33
TL7 / L11	M36	Фасон отсутствует
S2 / S3L	M30	M30
S3 / S4L	M30	M30
S4 / L4	M32	M32
S5 / L6	M32	M32
S6 / L7	M32	M32
S7 / L10	M34	Фасон отсутствует
S8 / L11	M36	Фасон отсутствует
SS2 / S3L	M28	M28
SS3 / S4L	M30	M30
O2 / S3L	M28	M28
O3 / L3	M30	M30
O4 / S4L	M32	M32
O5 / L6	M32 (M34)	M32

ОТТЕНКИ 17 различных оттенков по шкале VITA: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4, W0.5



ОДНОСЛОЙНЫЕ И ДВУХСЛОЙНЫЕ АКРИЛОВЫЕ ЗУБЫ

Боковая группа NAPERCE (двухслойные)

	A	B
 M28	28.2	8.0
	29.8	7.5
 M30	30.6	8.3
	31.7	8.3
 M32	31.4	8.4
	33.7	8.4
 M33	33.0	9.3
	34.7	8.9
 M34	34.0	9.5
	35.9	9.2
 M36	35.8	10.3
	37.8	10.4

Боковая группа MILLION (однослойные)

	A	B
 M28	28.2	8.0
	29.8	7.5
 M30	30.6	8.3
	31.7	8.3
 M32	31.4	8.4
	33.7	8.4
 M33	33.0	9.3
	34.7	8.9
 M34	34.0	9.5
	35.9	9.2
	A	B

ОТТЕНКИ 17 различных оттенков по шкале VITA: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4, W0.5

⚠ При заказе ориентируйтесь по оттенку и фасону.










Производитель оставляет за собой право вносить изменения в спецификацию, дизайн, ценообразование моделей и элементов комплектации, проиллюстрированных и описанных в этой публикации, в любое время, без каких-либо обязательств и предоставления уведомления о таком изменении. Все технические характеристики, указанные здесь, могут отличаться от фактических характеристик продукта. Все сочетания цветов и моделей доступны при условии фактического наличия.

YAMAHACHI DENTAL MFG. CO.

ДВУХСЛОЙНЫЕ АКРИЛОВЫЕ ЗУБЫ СЕРИИ FX



Фронтальная группа FX ВЕРХНИЕ

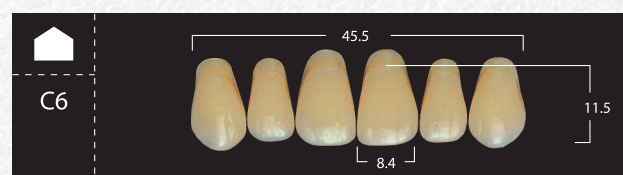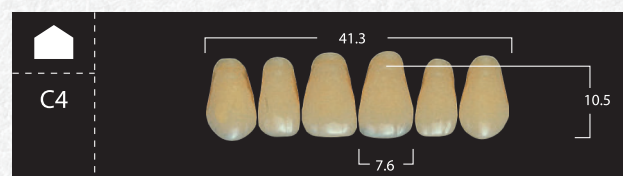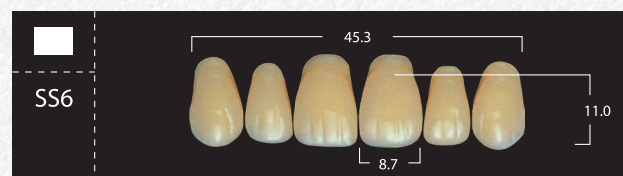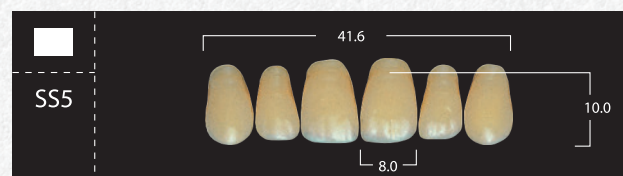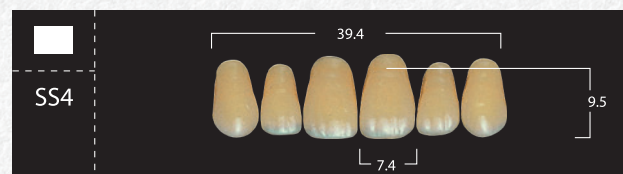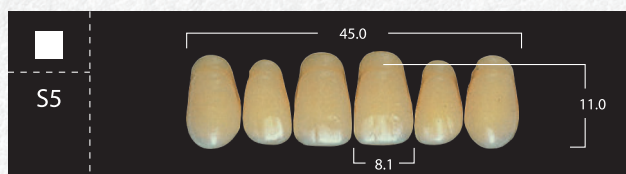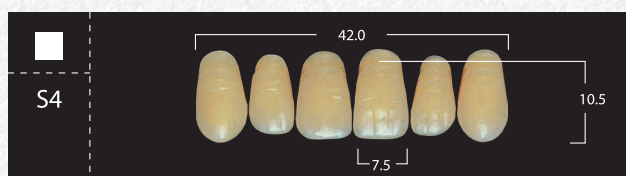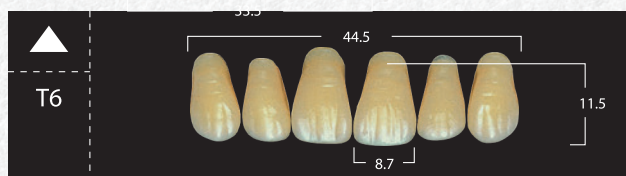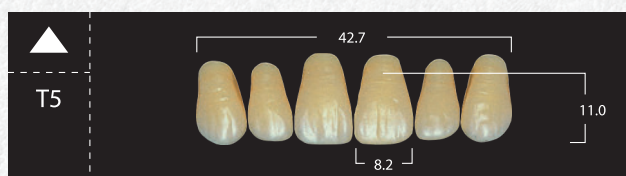

ОТТЕНКИ 17 различных оттенков по шкале VITA: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4, W0.5

⚠ При заказе ориентируйтесь по оттенку и фасону.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в спецификацию, дизайн, ценообразование моделей и элементов комплектации, проиллюстрированных и описанных в этой публикации, в любое время, без каких-либо обязательств и предоставлений уведомления о таком изменении. Все технические характеристики, указанные здесь, могут отличаться от фактических характеристик продукта. Все сочетания цветов и моделей доступны при условии фактического наличия.


YAMAHACHI DENTAL MFG. CO.

Двухслойные акриловые зубы серии FX




ДВУХСЛОЙНЫЕ АКРИЛОВЫЕ ЗУБЫ СЕРИИ FX

Фронтальная группа FX НИЖНИЕ

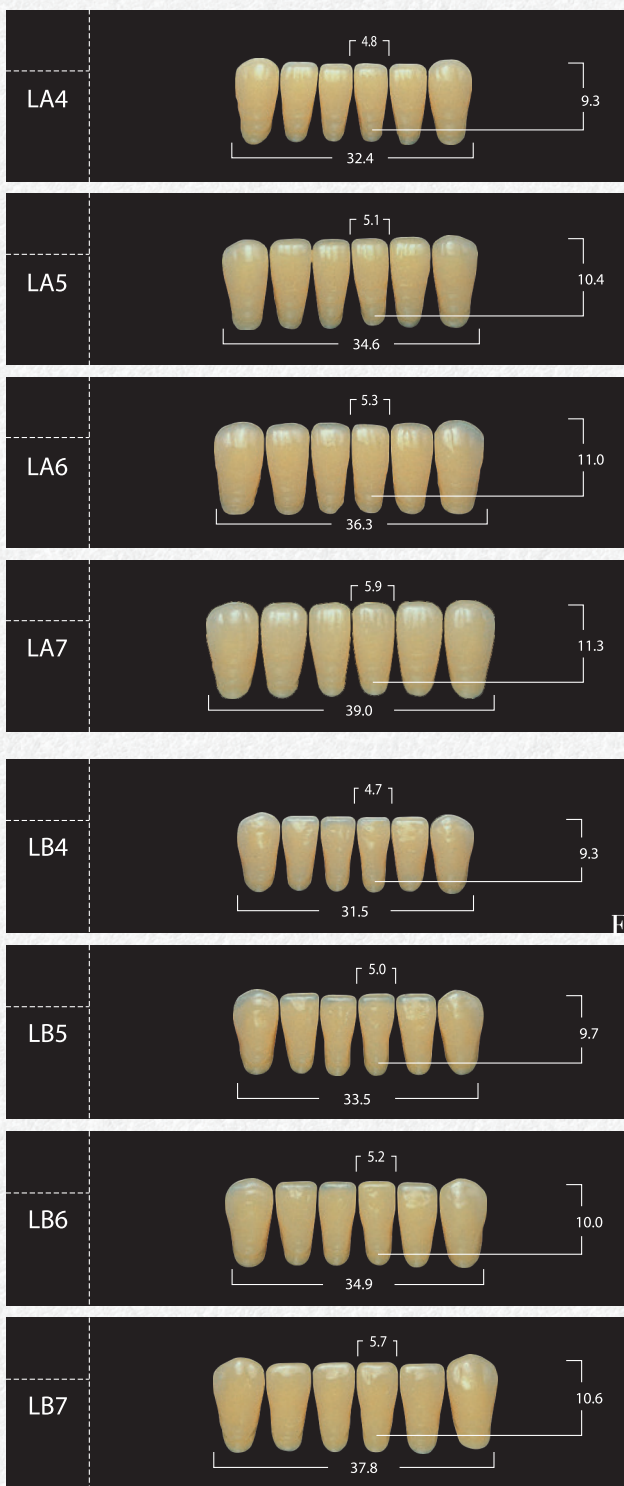

Боковая группа FX НИЖНИЕ

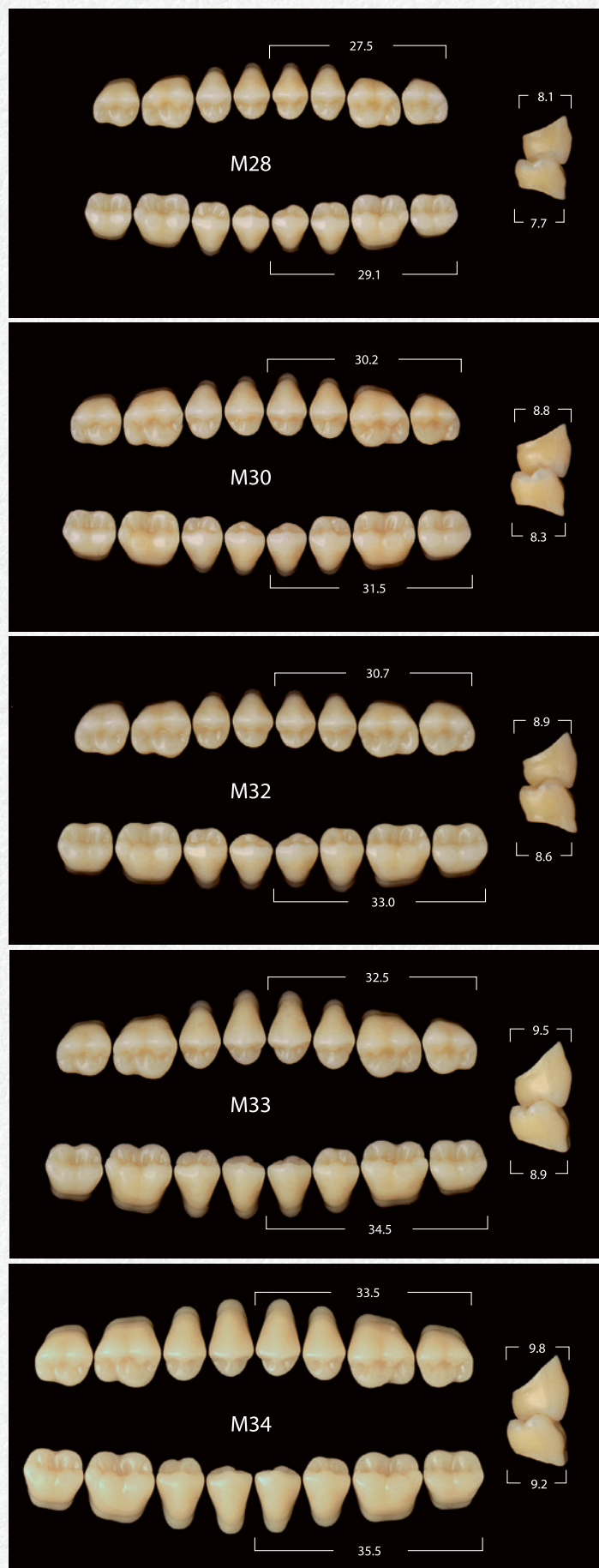

ДВУХСЛОЙНЫЕ АКРИЛОВЫЕ ЗУБЫ СЕРИИ FX



ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ ФАСОНОВ

ФРОНТАЛЬНЫЕ		БОКОВЫЕ
Верхние	Нижние	ВЕРХНИЕ / НИЖНИЕ
T4	LB4	M28
T5	LB5	M30
T6	LB6	M32
T7	LB7	M34
S4	LA4	M30
S5	LB6	M30
S6	LB7	M32
S7	LA7	M34
SS4	LB4	M28
SS5	LB5	M30
SS6	LA6	M32
SS7	LB7	M34
C4	LA4	M30
C5	LA5	M30
C6	LA6	M32
C7	LA7	M34



ОТТЕНКИ 17 различных оттенков по шкале VITA: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4, W0.5

⚠ При заказе ориентируйтесь по оттенку и фасону.

YAMAHACHI DENTAL MFG. CO.





Производитель оставляет за собой право вносить изменения в спецификацию, дизайн, ценообразование моделей и элементов комплектации, проиллюстрированных и описанных в этой публикации, в любое время, без каких-либо обязательств и предоставления уведомления о таком изменении. Все технические характеристики, указанные здесь, могут отличаться от фактических характеристик продукта. Все сочетания цветов и моделей доступны при условии фактического наличия.

ТРЕХСЛОЙНЫЕ АКРИЛОВЫЕ ЗУБЫ СЕРИЙ SOLUUT / SIMPLERR PX

**Представляем вам самые прочные и устойчивые
к образованию пятен зубы из акрила, которые вы так долго искали!**


На протяжении нескольких десятилетий мы занимались поставкой акриловых и композитных зубов на мировой стоматологический рынок. Исходя из нашего опыта, мы можем с уверенностью сказать, что клиенты, использующие акриловые зубы, стремятся приобрести продукт более высокого качества, нежели тот, которым они располагают на данный момент. С другой стороны, клиенты, выбирающие композитные зубы, ищут альтернативный материал аналогичного качества, обладающий устойчивостью к воздействию красящих веществ, но более доступный по цене. Учитывая эти потребности рынка, мы провели тщательный анализ, чтобы найти наиболее подходящий материал, который мог бы заполнить пробел между обычными акриловыми и композитными зубами с точки зрения качества и конкурентоспособности на рынке.

Учитывая подверженность композита воздействию красящих веществ, в вопросе выбора материала для наших искусственных зубов мы решили отдать предпочтение акрилу. В результате многолетних исследований, нам удалось найти подходящий материал желаемого качества, который подтолкнул нас к созданию новой серии искусственных зубов Soluut / Simplerr PX.

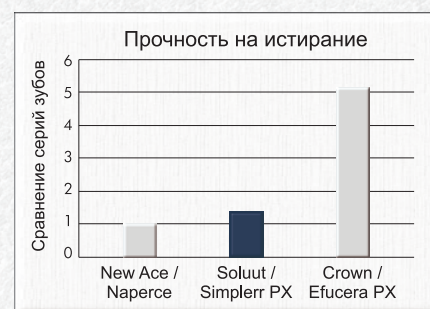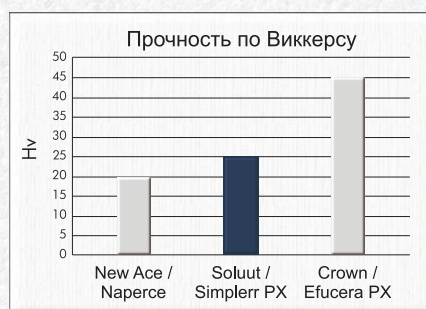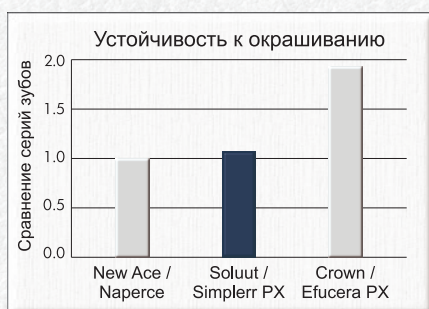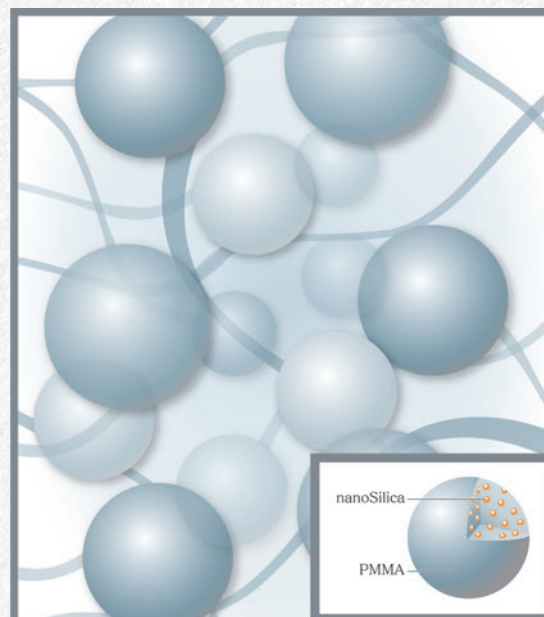

В отличие от серий New Ace / Naperce или FX, в состав Soluut / Simplerr PX входят мельчайшие наночастицы диоксида кремния, называемые nanoSilica, которые делают структуру полимерной матрицы более плотной и прочной. Благодаря этим наночастицам связь между полимерными нитями укрепляется, что делает их более прочными и устойчивыми к истиранию. Результаты испытаний на износостойкость показали, что при твердости Hv = 25 прочность материала Soluut / Simplerr PX оказывается на 60 % больше, чем у обычного акрила. Таким образом, Soluut / Simplerr PX предлагает клиентам, которых не устраивают обычные акриловые зубы, более качественную и конкурентоспособную альтернативу в виде трехслойной конфигурации зубов.

Палитра оттенков акриловых зубов серий Soluut / Simplerr PX

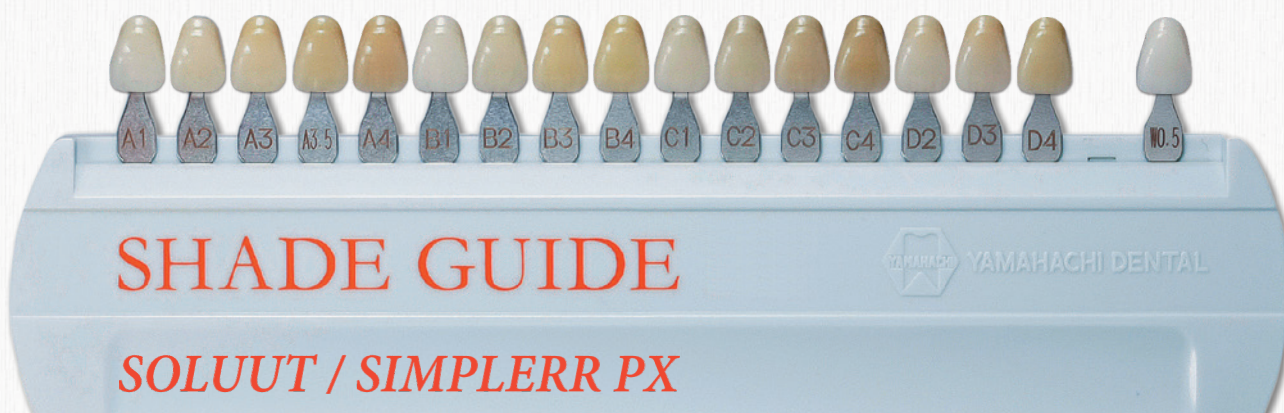

ОТТЕНКИ 17 различных оттенков по шкале VITA: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4, W0.5

⚠ При заказе ориентируйтесь по оттенку и фасону.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в спецификацию, дизайн, ценообразование моделей и элементов комплектации, проиллюстрированных и описанных в этой публикации, в любое время, без каких-либо обязательств и предоставления уведомления о таком изменении. Все технические характеристики, указанные здесь, могут отличаться от фактических характеристик продукта. Все сочетания цветов и моделей доступны при условии фактического наличия.

YAMAHACHI DENTAL MFG. CO.

Soluut / Simplerr PX Full Set



Soluut / Simplerr PX Full Set

Трёхслойные акриловые зубы (полный гарнитур - 28 зубов на 4 планках).

Soluut PX - фронтальные трёхслойные акриловые зубы.

Simplerr PX - боковые трёхслойные акриловые зубы.

Упаковка - коробка 4 планки (28 зубов):

- Soluut PX верхние - 1 планка (6 зубов).
- Soluut PX нижние - 1 планка (6 зубов).
- Simplerr PX верхние - 1 планка (8 зубов).
- Simplerr PX нижние - 1 планка (8 зубов).

Soluut PX



Soluut PX

Трёхслойные акриловые зубы (фронтальные трёхслойные - 6 зубов на планке), верхние или нижние.

Упаковка:

- планка: 6 зубов.
- коробка: 16 планок (6 зубов на планке).

Simplerr PX





Simplerr PX

Трёхслойные акриловые зубы (боковые трёхслойные - 8 зубов на планке), верхние или нижние.

Упаковка:

- планка: 8 зубов.
- коробка: 12 планок (8 зубов на планке).

Структура трёхслойных акриловых зубов серии PX

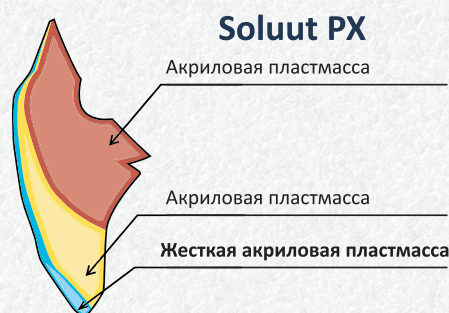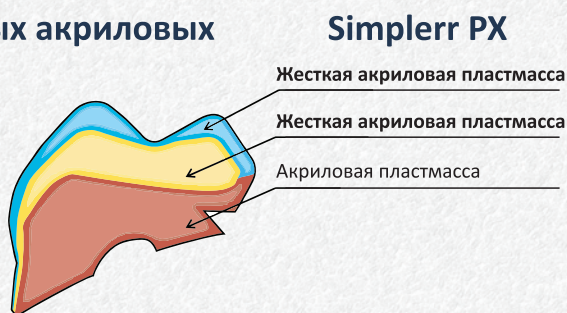

На конкурентном рынке уже много лет наблюдается стабильно высокий спрос на формы композитных зубов серий Crown / Efucera PX. Это подтолкнуло нас к созданию форм акриловых зубов серий Soluut / Simplerr PX, аналогичным формам композитных зубов серий Crown / Efucera PX и соответствующим полному цветовому диапазону шкалы VITA.

ОТТЕНКИ 17 различных оттенков по шкале VITA: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4, W0.5

⚠ При заказе ориентируйтесь по оттенку и фасону.

YAMAHACHI DENTAL MFG. CO.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в спецификацию, дизайн, ценообразование моделей и элементов комплектации, проиллюстрированных и описанных в этой публикации, в любое время, без каких-либо обязательств и предоставления уведомления о таком изменении. Все технические характеристики, указанные здесь, могут отличаться от фактических характеристик продукта. Все сочетания цветов и моделей доступны при условии фактического наличия.

ТРЕХСЛОЙНЫЕ АКРИЛОВЫЕ ЗУБЫ



SOLUUT PX фронтальная группа

Верхние

	A	B	C
T41	43.2	8.0	9.7
T51	46.6	8.6	10.4
T61	49.4	9.1	11.0

T41S	43.0	7.9	9.3
T51S	46.6	8.6	10.1
T61S	49.2	9.1	10.7

S51	45.0	8.4	10.7
S71	52.6	9.8	13.5
S81	53.4	10.0	13.7

S43S	41.3	7.8	8.5
S44S	42.7	7.7	10.3
S41S	43.5	7.9	9.6

S42S	44.2	8.5	9.8
S52S	45.9	8.3	10.9
S51S	46.6	9.0	10.8
S61S	48.7	8.8	11.2

O41	42.9	8.0	10.1
-----	------	-----	------

O31S	38.7	7.4	8.4
O51S	47.1	8.7	10.0
O61S	48.4	9.0	10.8

C42	43.2	8.2	10.5
C41	43.7	8.2	10.4
C51	46.4	8.8	11.3
C61	49.4	9.4	12.1

A	B	C
---	---	---

ОТТЕНКИ 17 различных оттенков по шкале VITA: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4, W0.5

⚠ При заказе ориентируйтесь по оттенку и фасону.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в спецификацию, дизайн, ценообразование моделей и элементов комплектации, проиллюстрированных и описанных в этой публикации, в любое время, без каких-либо обязательств и предоставления уведомления о таком изменении. Все технические характеристики, указанные здесь, могут отличаться от фактических характеристик продукта. Все сочетания цветов и моделей доступны при условии фактического наличия.

YAMAHACHI DENTAL MFG. CO.




ТРЕХСЛОЙНЫЕ АКРИЛОВЫЕ ЗУБЫ

SOLUUT PX фронтальная группа

■ Нижние		A	B	C
N31S		30.1	4.5	8.0
N61S		37.9	5.6	9.4

N31		33.4	5.1	8.9
N32		32.5	4.8	8.9
N41		34.4	5.1	8.6
N42		35.5	5.5	10.2
N81		41.8	6.4	12.1

N71L		39.9	5.8	11.6
------	--	------	-----	------

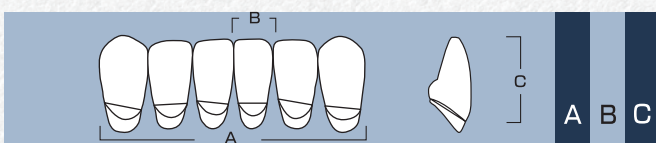

SIMPLERR PX боковая группа


A	B
28	28.8 8.4
	30.9 7.9

30	30.3 8.8
	32.5 8.5

32	32.4 9.4
	34.3 9.0

34	33.7 10.3
	36.0 10.1

36	36.1 11.6
	38.4 11.0

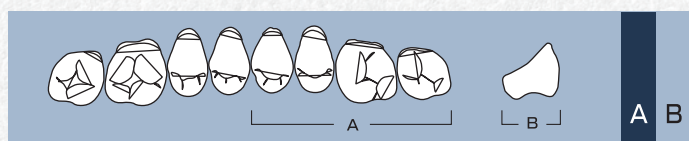

ОТТЕНКИ 17 различных оттенков по шкале VITA: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4, W0.5

⚠ При заказе ориентируйтесь по оттенку и фасону.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в спецификацию, дизайн, ценообразование моделей и элементов комплектации, проиллюстрированных и описанных в этой публикации, в любое время, без каких-либо обязательств и предоставления уведомления о таком изменении. Все технические характеристики, указанные здесь, могут отличаться от фактических характеристик продукта. Все сочетания цветов и моделей доступны при условии фактического наличия.

YAMAHACHI DENTAL MFG. CO.

Трёхслойные акриловые зубы SOLUUT PX / SIMPLERR PX

ТРЕХСЛОЙНЫЕ АКРИЛОВЫЕ ЗУБЫ



ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ ФАСОНОВ

ФРОНТАЛЬНЫЕ		БОКОВЫЕ
Верхние	Нижние	ВЕРХНИЕ / НИЖНИЕ
T41	N32	28
T51	N42	30
T61	N61S	34
T41S	N32	28
T51S	N42	30
T61S	N61S	34
S51	N42	30
S71	N71L	34
S81	N81	36
S43S	N41	28
S44S	N41	28
S41S	N32	28
S42S	N31	28
S52S	N42	30
S51S	N42	30
S61S	N61S	34
O41	N32	28
O31S	N31S	28
O51S	N61S	32
O61S	N61S	32
C41	N41	32
C42	N41	28
C51	N42	30
C61	N61S	34



ОТТЕНКИ 17 различных оттенков по шкале VITA: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4, W0.5

⚠ При заказе ориентируйтесь по оттенку и фасону.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в спецификацию, дизайн, ценообразование моделей и элементов комплектации, проиллюстрированных и описанных в этой публикации, в любое время, без каких-либо обязательств и предоставлений уведомления о таком изменении. Все технические характеристики, указанные здесь, могут отличаться от фактических характеристик продукта. Все сочетания цветов и моделей доступны при условии фактического наличия.




YAMAHACHI DENTAL MFG. CO.

ТРЕХСЛОЙНЫЕ КОМПОЗИТОПОЛНЕННЫЕ ЗУБЫ СЕРИЙ CRONW / EFUCERA PX

Представляем вам самые прочные и устойчивые к образованию пятен зубы из композита, которые вы так долго искали!

Акриловые зубы широко известны своей эстетикой, которая проявляется в богатстве оттенков и форм. Однако у таких зубов есть один существенный недостаток: с течением времени структура их поверхности ухудшается. Чтобы решить эту проблему, мы начали снабжать стоматологический рынок продукцией из композитных материалов. Несмотря на то, что зубы из композита намного прочнее акриловых и демонстрируют высокую износостойкость при применении в клинической практике, они сильнее подвержены окрашиванию. Композитные зубы, как правило, и сами состоят из компонентов, способных вызывать изменение цвета и образование пятен: уретандиметакрилата (UDMA) и наполнителя. Учитывая эти присущие акриловым и композитным зубам недостатки, мы постарались решить эту проблему.


Наша цель — создать высокопрочные и устойчивые к образованию пятен зубы из единого композитного материала — была достигнута благодаря разработке материала PX. Обладая твердостью Hv = 45, PX более чем в 5 раз устойчивее к истиранию, что обеспечивает хорошую устойчивость к износу и гораздо более длительный срок службы по сравнению с акриловыми материалами.

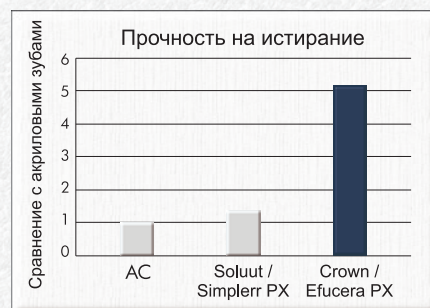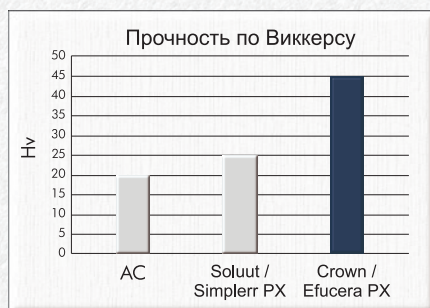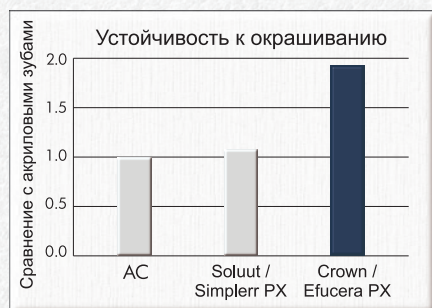

Мы протестировали различные добавки, препятствующие образованию пятен, которые были бы совместимы с нашим производственным процессом и формулой PX. Хорошие результаты продемонстрировал один особенно эффективный фторсодержащий мономер. Клинические испытания показали, что PX в два раза прочнее акриловых, но при этом обладает такой же устойчивостью к образованию пятен. Благодаря превосходным свойствам PX мы разработали передовую технологию изготовления зубов из композитных материалов.



Палитра оттенков композитонаполненных зубов серий Crown / Efucera PX

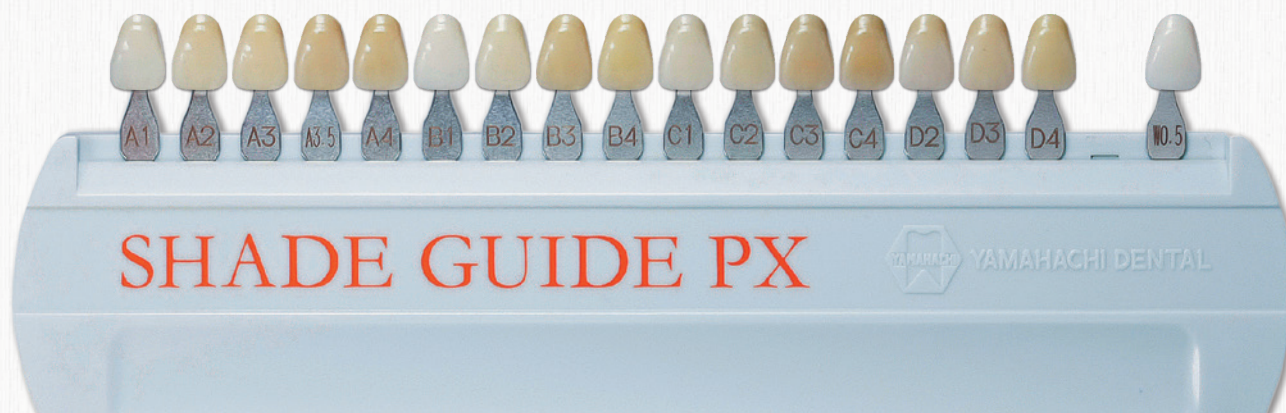

ОТТЕНКИ 17 различных оттенков по шкале VITA: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4, W0.5

⚠ При заказе ориентируйтесь по оттенку и фасону.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в спецификацию, дизайн, ценообразование моделей и элементов комплектации, проиллюстрированных и описанных в этой публикации, в любое время, без каких-либо обязательств и предоставления уведомления о таком изменении. Все технические характеристики, указанные здесь, могут отличаться от фактических характеристик продукта. Все сочетания цветов и моделей доступны при условии фактического наличия.

YAMAHACHI DENTAL MFG. CO.

ТРЕХСЛОЙНЫЕ КОМПОЗИТОНАПОЛНЕННЫЕ ЗУБЫ



PX Full Set



PX Full Set

Композитонаполненные зубы (полный гарнитур - 28 зубов на 4 планках).

Crown PX - фронтальные трёхслойные композитонаполненные зубы.

Efucera PX - боковые трёхслойные композитонаполненные зубы.

Упаковка - коробка 4 планки (28 зубов):

- Crown PX верхние - 1 планка (6 зубов).
- Crown PX нижние - 1 планка (6 зубов).
- Efucera PX верхние - 1 планка (8 зубов).
- Efucera PX нижние - 1 планка (8 зубов).

Crown PX



Crown PX

Композитонаполненные зубы (фронтальные трёхслойные - 6 зубов на планке), верхние или нижние.

Упаковка:

- планка: 6 зубов.
- коробка: 16 планок (6 зубов на планке).

Efucera PX




Efucera PX

Композитонаполненные зубы (боковые трёхслойные - 8 зубов на планке), верхние или нижние.


Упаковка:

- планка: 8 зубов.
- коробка: 12 планок (8 зубов на планке).


Структура композитонаполненных зубов серий Crown / Efucera PX

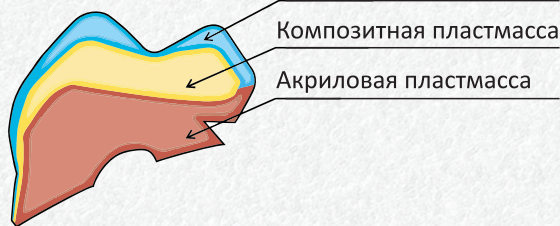

Efucera PX

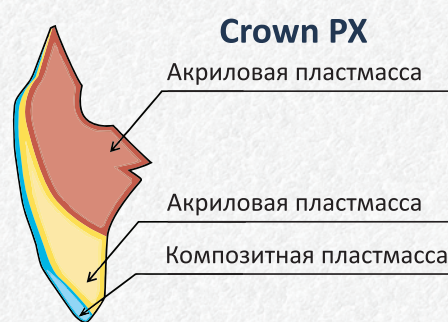


Полная сбалансированная форма

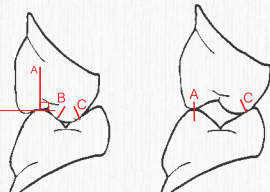


Окклюзионные валики расположены внецентренно для достижения полного окклюзионного равновесия. Контактные пункты А, В и С на окклюзионной поверхности предназначены для повышения устойчивости протеза. Контактные пункты А и С предназначены для боковых движений во время жевания.

Установочная линия

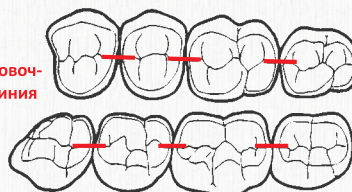

Воображаемая установочная линия предназначена для индивидуальной подгонки протеза техник под конкретные требования пациента. Что делает эту конструкцию подходящей, в основном, для создания частичных протезов, требующих особого расположения относительно соседних естественных зубов.

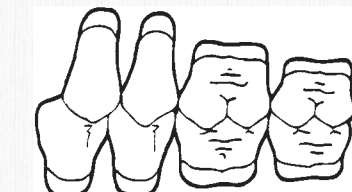

(Идеальная анатомическая проксимальная) IAP-модель лица

Для баланса в эстетике расположения зубов от фронтальных до моляров щечная сторона имеет перекрытие от одного до двух зубов.



ТРЁХСЛОЙНЫЕ КОМПОЗИТОПОЛНЕННЫЕ ЗУБЫ

Фронтальная группа CROWN PX

■ ВЕРХНИЕ

A B C

▲ T41		43.2	8.0	9.7
▲ T51		46.6	8.6	10.4
▲ T61		49.4	9.1	11.0

▲ T41S		43.0	7.9	9.3
▲ T51S		46.6	8.6	10.1
▲ T61S		49.2	9.1	10.7

■ S51		45.0	8.4	10.7
■ S71		52.6	9.8	13.5
■ S81		53.4	10.0	13.7

■ S43S		41.3	7.8	8.5
■ S44S		42.7	7.7	10.3
■ S41S		43.5	7.9	9.6

■ S42S		44.2	8.5	9.8
■ S52S		45.9	8.3	10.9
■ S51S		46.6	9.0	10.8
■ S61S		48.7	8.8	11.2

● O41		42.9	8.0	10.1
----------	--	------	-----	------

○ O31S		38.7	7.4	8.4
○ O51S		47.1	8.7	10.0
○ O61S		48.4	9.0	10.8

■ C42		43.2	8.2	10.5
■ C41		43.7	8.2	10.4
■ C51		46.4	8.8	11.3
■ C61		49.4	9.4	12.1

	A	B	C
--	---	---	---

ОТТЕНКИ 17 различных оттенков по шкале VITA: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4, W0.5

⚠ При заказе ориентируйтесь по оттенку и фасону.

YAMAHACHI DENTAL MFG. CO.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в спецификацию, дизайн, ценообразование моделей и элементов комплектации, проиллюстрированных и описанных в этой публикации, в любое время, без каких-либо обязательств и предоставления уведомления о таком изменении. Все технические характеристики, указанные здесь, могут отличаться от фактических характеристик продукта. Все сочетания цветов и моделей доступны при условии фактического наличия.

Трёхслойные композитонаполненные зубы CROWN PX

Трёхслойные композитонаполненные зубы



Фронтальная группа CROWN PX			
■ НИЖНИЕ			
		A	B C
N31S		30.1	4.5 8.0
N61S		37.9	5.6 9.4
N31		33.4	5.1 8.9
N32		32.5	4.8 8.9
N41		34.4	5.1 8.6
N42		35.5	5.5 10.2
N81		41.8	6.4 12.1
N71L		39.9	5.8 11.6
		A	B C

Боковая группа EFUCERA PX			
		A	B
28		29.2	8.6
30		31.1	8.2
32		32.8	9.2
34		34.1	10.0
36		36.0	10.5
		A	B



ОТТЕНКИ 17 различных оттенков по шкале VITA: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4, W0.5

⚠ При заказе ориентируйтесь по оттенку и фасону.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в спецификацию, дизайн, ценообразование моделей и элементов комплектации, проиллюстрированных и описанных в этой публикации, в любое время, без каких-либо обязательств и предоставления уведомления о таком изменении. Все технические характеристики, указанные здесь, могут отличаться от фактических характеристик продукта. Все сочетания цветов и моделей доступны при условии фактического наличия.

YAMAHACHI DENTAL MFG CO.



ТРЁХСЛОЙНЫЕ КОМПОЗИТОПОЛНЕННЫЕ ЗУБЫ

ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ ФАСОНОВ

ФРОНТАЛЬНЫЕ		БОКОВЫЕ
Верхние	Нижние	EFUCERA PX
T41	N32	28
T51	N42	30
T61	N61S	34
T41S	N32	28
T51S	N42	30
T61S	N61S	34
S51	N42	30
S71	N71L	34
S81	N81	36
S43S	N41	28
S44S	N41	28
S41S	N32	28
S42S	N31	28
S52S	N42	30
S51S	N42	30
S61S	N61S	34
O41	N32	28
O31S	N31S	28
O51S	N61S	32
O61S	N61S	32
C41	N41	32
C42	N41	28
C51	N42	30
C61	N61S	34



Трёхслойные композитонаполненные зубы CROWN PX / EFUCERA PX

ОТТЕНКИ 17 различных оттенков по шкале VITA: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4, W0.5

⚠ При заказе ориентируйтесь по оттенку и фасону.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в спецификацию, дизайн, ценообразование моделей и элементов комплектации, проиллюстрированных и описанных в этой публикации, в любое время, без каких-либо обязательств и предоставления уведомления о таком изменении. Все технические характеристики, указанные здесь, могут отличаться от фактических характеристик продукта. Все сочетания цветов и моделей доступны при условии фактического наличия.

YAMANACHI DENTAL MFG. CO.



БОНДИНГ ДЛЯ ПРОЧНОЙ ФИКСАЦИИ ИСКУССТВЕННЫХ ЗУБОВ В СЪЁМНЫХ ПРОТЕЗАХ

Re-Fine EX (Liquid) PRIMER

Предназначен для наилучшего сцепления акриловых зубов и базиса протеза из акриловых и безмономерных пластмасс. За исключением: Basis ST YAMAHACHI (Япония) и материалов на основе полиэстера и полиамида.



Тест с вырыванием акрилового зуба



без использования праймера




зуб отошел по линии прилегания

с использованием праймера



зуб переломился посередине

Благодаря использованию бондинга, улучшается сцепление базиса протеза и акриловых зубов. Наносится на поверхность зубного ряда перед формовкой и последующей полимеризации пластмассы.

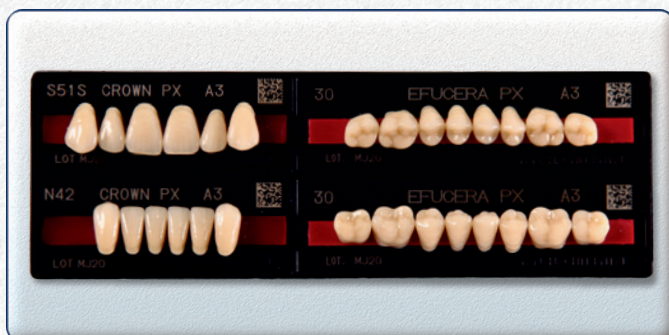

Использование:

1. На прилегающей и боковой поверхностях зуба необходимо сделать отверстия. Желательно для улучшения адгезии прилегающую поверхность сделать шероховатой.
2. После выпаривания воска, нанесите **Re-Fine EX (Liquid) PRIMER** на прилегающую поверхность зуба. Бондинг так же эффективен для обработки в процессе реставрации (починки) протеза пластмассами быстрой полимеризации. Может использоваться в качестве жидкости для предварительной обработки перед ремонтом протезов.

Re-Fine EX (Liquid) PRIMER

Тест на адгезию искусственного зуба и акриловой пластмассы:


Синим: без праймера

Красным: с использованием праймера

- 1 - Зубы без отверстий.
- 2 - Зубы с отверстиями.

Упаковка: жидкость 100 мл.

Производитель: YAMAHACHI (Япония).

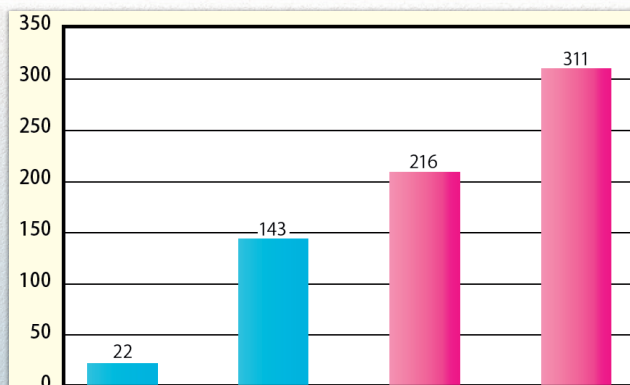

Basis LF Pink / Crown PX / Efucera PX



Работу изготовил зубной техник-демонстратор:
Александр Жидченко.

Basis LF Pink + Crown PX + Efucera PX

Полный съёмный протез из долговечных и эстетичных материалов.

Используемые материалы:

- **Базис протеза** - синтетическая пластмасса горячего отверждения Basis, оттенок LF Pink (розовый с прожилками) (стр. 28).
- **Фронтальные зубы** - фронтальные трёхслойные композитонаполненные зубы Crown PX (стр. 17-21).
- **Боковые зубы** - боковые трёхслойные композитонаполненные зубы Efucera PX (стр. 17-21).



Базис протеза оттенка LF pink (розовый с прожилками) имитирующий десну с капиллярами



Видимые слои на срезе жевательных трёхслойных композитонаполненных зубов Efucera PX



Эстетичная прозрачность режущего края фронтальных трёхслойных композитонаполненных зубов Crown PX

Basis Light Pink / New Ace / Naperce



Работу изготовил зубной техник-демонстратор:
Александр Жидченко.

Basis Light Pink + New Ace + Naperce

Полный съёмный протез из долговечных и эстетичных материалов.

Используемые материалы:

- **Базис протеза** - синтетическая пластмасса горячего отверждения Basis, оттенок Light Pink (светло-розовый) (стр. 28).
- **Фронтальные зубы** - фронтальные двухслойные акриловые зубы New Ace (стр. 4-8).
- **Боковые зубы** - боковые двухслойные акриловые зубы Naperce (стр. 4-8).



Базис протеза оттенка Light Pink (светло-розовый) имитирующий светлую десну



Видимые слои на срезе жевательных двухслойных акриловых зубов Naperce



Естественная глубина цвета фронтальных двухслойных акриловых зубов New Ace

Basis Pink / New Ace / Million



Работу изготовил зубной техник-демонстратор:
Александр Жидченко.

Basis Pink + New Ace + Million

Полный съёмный протез из долговечных и эстетичных материалов.

Используемые материалы:

- **Базис протеза** - синтетическая пластмасса горячего отверждения Basis, оттенок Pink (розовый) (стр. 28).
- **Фронтальные зубы** - фронтальные двухслойные акриловые зубы New Ace (стр. 4-8).
- **Боковые зубы** - боковые однослойные акриловые зубы Million (стр. 8).



Базис протеза оттенка Pink (розовый) имитирующий натуральный цвет десны



Жевательные однослойные акриловые зубы Million



Естественная глубина цвета фронтальных двухслойных акриловых зубов New Ace



ТЕРМОПЛАСТМАССЫ YAMANASHI

Характеристики пластмассы	Basis ST (полипропилен)	Basis PA (полиметилакрилат)
Водопоглощаемость, мг/мм ³	1	20
Прочность, МПа	1001	2051
Коэффициент плавления, мг/мм ³	0,1	0,2
Температура и время сушки	Не сушить	80-90°C 6-16 ч
	После просушки материал сохраняет свои параметры в течении 10-14 дней при условии хранения в сухом месте. После этого срока необходима повторная сушка.	
Температура плавления, °C	230	280
Время нагрева, мин.	25	25
Давление, атмосфер	8	8
Температура кюветы, °C	30-40	30-40
Ремонтопригодность	нет	да
Выдержка под давлением	2 минуты	
Фасовка, грамм	50/100/500/1000 гр	
Расцветка	LF Pink (розовый с прожилками), Real Pink	LF Pink (розовый с прожилками), Live Pink



НЕ СОДЕРЖАТ МЕТИЛМЕТАКРИЛАТ (ПРЕКУРСОР)

Материал предназначен для изготовления различных типов съёмных конструкций методом инъекционного литья. Прекрасно обрабатывается и полируется без пригорания и тянущихся нитей, имеет глубокий и насыщенный цвет.

Применение

- Временные бюгельные конструкции
- Ортодонтические конструкции
- Эстетические кламера
- Комбинированные конструкции
- Временные мосты и коронки

Преимущества

- Высочайшая эстетичность и легкость конструкций
- Высокая эластичная память
- Высокие показатели прочности
- Не токсичен, не вызывает аллергических реакций
- Низкая теплопроводимость

✓ - Протезы из Basis PA/ST - являются гидрофобными - не впитывают воду, что препятствует размножению микробов, являющихся причиной неприятных запахов

✓ - Пластмассы Basis PA/ST - предусмотрены для использования со всеми моделями аппаратов технологии инъекционного литья.

Назначение:

- Basis ST (LF-Pink - розовый с прожилками) - изготовление частичных гибких дентальных протезов.
- Basis PA (LF-Pink - розовый с прожилками) - изготовление полных дентальных протезов.

⚠ При заказе ориентируйтесь по наименованию.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в спецификацию, дизайн, ценообразование моделей и элементов комплектации, проиллюстрированных и описанных в этой публикации, в любое время, без каких-либо обязательств и предоставления уведомления о таком изменении. Все технические характеристики, указанные здесь, могут отличаться от фактических характеристик продукта. Все сочетания цветов и моделей доступны при условии фактического наличия.

YAMANASHI DENTAL MFG. CO.



ПОЛИРОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ YAMANACHI



BLUE SHINE

Паста для финишной полировки протезов.

- Паста для полировки протезов, изготовленных из всех видов пластмасс и термопластмасс.
- За счет густой консистенции паста удерживается на фильце, что делает процесс полировки более эффективным и качественным.
- Идеально подобранные компоненты пасты позволяют добиться идеального блеска протеза в процессе полировки. Упаковка: 50 г / 300 г. Артикул: STYBS/50г. / STYBS300г.



CREAMY SAND

Порошок для предварительной полировки пластмассы.

- При смешивании порошка с водой достигается пастообразное состояние, для удобной и эффективной полировки.
- С применением Creamy Sand время полировки уменьшается вдвое, при этом вы получаете блеск и чистоту обрабатываемой поверхности.

Упаковка: 100 г / 3кг.

Артикул: STYCRS/100 g. / STYCRS/3 kg.



TIGER MULTI

Полировочная паста / полировочный порошок в брикетах.

- Мелкодисперсный порошок оксида алюминия способствует наиболее эффективной финишной полировке акриловых пластмасс.
- Благодаря своей структуре и свойствам не оставляет маслянистых следов.
- Паста также может применяться для предварительной полировки различных материалов - керамики, металла.

Упаковка: брикет - 400 гр. Артикул: STYTIM



MP POWDER

Порошок для промежуточной и финишной обработки поликарбонатных, полипропиленовых и акриловых пластмасс.

- При смешивании порошка с водой достигается пастообразное состояние, для удобной и эффективной полировки.

Упаковка: 1 кг.

Артикул: STYMP/1 kg



GLAZE POWDER

Порошок для финишной и эстетической полировки гибких (нейлоновых) базисных протезов, в том числе и из полипропиленовой термопластмассы Basis ST.

Особенности: Позволяет провести этап финишной полировки за короткое время (7-10 мин. при оборотах 3500-4000 об/мин). Позволяет добиться эстетического блеска в течении 10 минут после этапа финишной полировки.

При смешивании порошка с водой достигается пастообразное состояние, для удобной и эффективной полировки.

Упаковка: 1,5 кг. Артикул: STYGP/1.5 kg



До полировки



После полировки

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ РАБОТЫ С ТЕРМОПЛАСТМАССАМИ



Компания YAMAHACHI DENTAL (Япония) предлагает широкий перечень искусственных зубов, различных фасонов и расцветки VITA. Данные зубы имеют высокую адгезию с термопластмассами YAMAHACHI DENTAL.



Композитные трёхслойные зубы (CROWN, EFUCERA)

- Полный гарнитур (CROWN/EFUCERA PX) - 28 зубов на 4-х планках.
- Боковые зубы (EFUCERA PX) - планка 8 зубов.
- Фронтальные зубы (CROWN PX) - планка 6 зубов.



Акриловые двухслойные зубы NEW ACE/NAPERCE

- Полный гарнитур (GLORIA) - планка 28 зубов.
- Боковые зубы (NAPERCE) - планка 8 зубов.
- Фронтальные зубы (NEW ACE) - планка 6 зубов.

Акриловые трёхслойные зубы SOLUUT/SIMPLERR

- Боковые зубы (SIMPLERR) - планка 8 зубов.
- Фронтальные зубы (SOLUUT) - планка 6 зубов.



Акриловые зубы в боксах NEW ACE/MILLION - 20 полных гарнитуров в боксах.

Фронтальные зубы - двухслойные, боковые - однослойные.

- 20 полных гарнитуров по 28 зубов (NEW ACE/MILLION).
- 20 боковых (верх-низ) гарнитуров в боксе.



Apollon Sep LV (высокой текучести) - сепарационная жидкость для базисной пластмассы; изоляция пластмассы от гипса, и гипса от гипса.

Используется с применением распылителя.

- Apollon Sep LV (высокой текучести) - 500мл., 2000мл.



Гильза для применения в технологии инъекционного литья термопластмасс. Мягкая алюминиевая с крышкой.

Толщина стенки - 0,1 мм, d = 25 мм, длина 100 мм.
Вместимость - 35 гр. Упаковка - 20/100 шт.
Позволяют работать при давлении 5,5 атм.



Гильза для применения в технологии инъекционного литья термопластмасс. Жесткая алюминиевая с крышкой.

Толщина стенки - 0,3 мм, d = 25 мм, длина 45/77/85/100 мм.
Вместимость - 15/20/25/35 гр. Упаковка - 20/100 шт.
Позволяют работать при давлении 8-9 атм.



⚠ При заказе ориентируйтесь по наименованию и оттенку.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в спецификацию, дизайн, ценообразование моделей и элементов комплектации, проиллюстрированных и описанных в этой публикации, в любое время, без каких-либо обязательств и предоставления уведомления о таком изменении. Все технические характеристики, указанные здесь, могут отличаться от фактических характеристик продукта. Все сочетания цветов и моделей доступны при условии фактического наличия.

YAMAHACHI DENTAL MFG. CO.

Re-fine Bright набор 5x50г + 260мл



Re-Fine Bright

Самотвердеющая высокопрочная облицовочно-моделировочная акриловая пластмасса быстрого отверждения (холодная полимеризация).

Свойства:

- Устойчивость цвета, сохранение необходимой степени прозрачности при полимеризации.
- Высокий уровень прочности; сочетание крупных и мелких частиц полимера усиливает связывающие и другие механические качества пластмассы.
- Удобство в работе: физические свойства смеси порошка и жидкости позволяют легко моделировать желаемую форму (смесь при моделировании кистью не растекается).
- Удобство в обработке: пластмасса не прилипает к инструментам, стружка не накручивается на фрезы и боры при обработке.

Re-fine Bright набор 250г + 260мл



Re-fine Bright отдельно жидкость 260мл



Re-fine Bright отдельно порошок 50г



Re-fine Bright отдельно порошок 250г



Характеристики:

При снижении температуры рабочей среды увеличивается время полимеризации.

Изменение цвета в течение 1 недели в дистиллированной воде при температуре 37°C	Прочность на излом (МПа)	Твердость по Кнупу (Нк)	Коэффициент замешивания жидкость/порошок	Время полимеризации при 25°C
$\Delta E = 0.12$	78.6	13.6	1/2	2 минуты 30 секунд
			2/3	3 минуты

Область применения:

- Облицовка металлических каркасов, замков
- Создание временных коронок
- Реставрация съемных протезов
- Замена выпавшего зуба в базисном протезе

- 1. Метод работы кистью:** работайте кистью обычным способом. Застывшая пластмасса на кончике кисти должна регулярно удаляться.
- 2. Полимеризация под прессом:** Стандартные пропорции для подготовки смеси - 2г порошка на 1мл жидкости. Тестообразная консистенция образуется в течение 30-40 секунд после замешивания (время замешивания: 10-15 секунд). (3 деления шприца равняются 0,5г).

Варианты оттенков: 1) PINK (розовый). 2) LF PINK (розовый с прожилками). 3) CLEAR (прозрачный). 4) A1. 5) A2. 6) A3. 7) A3.5. 8) A4. 9) B2. 10) B3. 11) C2. 12) C3. 13) D2. 14) D3.



Варианты поставки:

Наборы одного цвета

(5x50г + 260мл / 250г + 260мл):

Порошок (одного из поставляемых оттенков) 5x50 / 250 гр., жидкость 260 мл., 2 кисточки, мерный стакан, пипетка, силиконовый стаканчик для замешивания.

Отдельно жидкость: 260 мл.

Отдельно порошок: 50/250г постав. оттенка.

Наборы разных цветов (5x50г + 260мл):

Набор (SET 1): Порошок (A2-50 гр., A3-50гр.x2, A3.5-50 гр., Розовый с прожилками-50 гр.), Жидкость 260 мл., 2 кисточки, мерный стакан, силиконовый стаканчик для замешивания.

Набор (SET 2): Порошок (A2-50 гр., A3-50гр., A3.5-50 гр., Прозрачный -50 гр., Розовый с прожилками-50 гр.), Жидкость 260 мл., 2 кисточки, мерный стакан, пипетка, силиконовый стаканчик для замешивания.

Набор (SET 3): Порошок (A2-50 гр., A3-50гр., B2-50 гр., C2-50 гр., D2-50 гр.), Жидкость 260 мл., 2 кисточки, мерный стакан, пипетка, силиконовый стаканчик для замешивания.

Basing Resin



Варианты поставки:

Набор: Порошок - 1 кг, жидкость - 500 мл,
мерная ложка, пипетка.

Basing Resin

Композитный материал мгновенной полимеризации для изготовления индивидуальных слепочных ложек и заготовок для базиса.

Отличительные особенности:

- Этот материал особенно удобен для изготовления индивидуальных слепочных ложек и заготовок для базиса, поскольку он не прилипает к ёмкости для смешивания, рукам и лопатке.
- Работа с материалом отличается простотой.
- Два типа пластмасс: Нормальной полимеризации и Медленной полимеризации.

Время полимеризации при 23°C:

- Нормальная полимеризация - 4 мин.
- Медленная полимеризация - 7 мин.

Пропорция замешивания

10 грамм порошка / 3,5 см³ жидкости.

Оттенки:



Pink
(Розовый)



Blue
(Голубой)



Basis

Basis

Базисная пластмасса горячей полимеризации.

Применение:

- Изготовление базисных протезов.
- Варим пластмассу в течении 30-40 мин при температуре 95°C.
- Охлаждение при комнатной температуре 30 мин, затем в холодную воду.

Особенности:

- Минимальное образование воздушных пузырьков.
- Мелкая дисперсность частиц порошка позволяет получить гладкую поверхность протеза после полимеризации, значительно экономя время на полировку.

Оттенки:



Light Pink
(Светло-розовый)



LF Pink
(розовый с прожилками)



Dark Pink
(Темно-розовый)



Pink
(розовый)



Clear
(прозрачный)

Варианты поставки:

Порошок - 1 кг; Жидкость - 500 мл.
Набор - порошок 300г + жидкость 140 мл.



Basis HI

Basis HI

Высокопрочная базисная пластмасса горячей полимеризации.

Применение:

- Изготовление высокопрочных базисных протезов.
- Для разведения пластмассы используется жидкость Basis.

Особенности:

- Высокая прочность материала позволяет изготавливать более тонкие нёбные части.
- Минимальное образование воздушных пузырьков.
- Мелкая дисперсность частиц порошка позволяет получить гладкую поверхность протеза после полимеризации, значительно экономя время на полировку.

Характеристики:


- Прочность на изгиб - 112,7 МПа.
- Модуль упругости - 2,400 МПа.
- Остаточные мономеры - 0,7 wt%.
- Водопоглощение - 24 мю г/мм3.
- Растворяемость - 1.2 мю г/мм3.

Варианты поставки:


Порошок - 1кг, 100г; Жидкость - 500 мл.

Диаграммы:

Сравнительная прочность на удар:

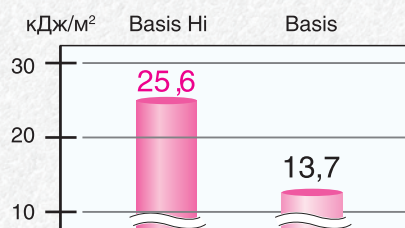

Сравнительная прочность на изгиб:

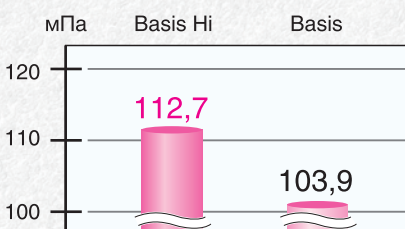

Оттенок:



LF Pink
(розовый
с прожилками)



Basis Quick

Basis Quick

Базисная пластмасса двойной (быстрой или микроволновой) полимеризации.

Применение:

- Изготовление базисных протезов за короткое время.
- Варите пластмассу в течении 15-20 мин при температуре 95°C.
- Охлаждайте при комнатной температуре 30 мин, затем поместите в холодную воду.
- Возможна полимеризация в микроволновой печи в течение 3 минут при 500 Ватт мощности.

Особенности:

- Быстрая полимеризация обеспечивает великолепные физические свойства и стойкость цвета изделия.

Варианты поставки:

Порошок - 1 кг; Жидкость - 500 мл.

Оттенок: LF Pink (розовый с прожилками).



Basis FLOW



Варианты поставки:

Порошок - 650гр., Жидкость - 500 мл.

Basis FLOW

Универсальная жидкотекучая пластмасса холодной полимеризации.

Применение:

- Изготовление полных и частичных базисных протезов.

Особенности:

- Достаточное время для заливки, что сокращает общее время изготовления протеза.
- Минимальное образование воздушных пузырьков.
- Минимальная усадка.

Характеристики:

- Прочность на изгиб - 80,4 МПа.
- Прочность на удар - 168 МПа.
- Твердость по Виккерсу (Hv) - 19.

Оттенки: 1) LF Pink (розовый с прожилками).

2) Dark Pink (Розовый). 3) A2. 4) A3. 5) Clear (прозрачный).



Ortho Bright Color Kit



Варианты поставки:

Набор: Порошок - 5*50 г, Жидкость - 70 мл, Мерный шприц, насадки для шприца - 3 шт., силиконовый стаканчик для замешивания, мерный стаканчик, расцветка.

Отдельно:

Порошок 50 г (оттенки указаны ниже).
Жидкость 70 мл.

Ortho Bright Color Kit

Набор самотвердеющих цветных пластмасс с длительным временем полимеризации для применения в ортодонтии.

Физические свойства

Процесс и время затвердевания

- Время замешивания (начало взаимодействия полимера и мономера)
- Рабочее время
- Окончательное затвердевание



Весь процесс полимеризации занимает около 8 минут. Такое длительное затвердевание обеспечивает наиболее оптимальные условия для точного моделирования.


Текущность материала:

- Пластмасса в жидком / тестообразном состоянии легко моделируется, масса однородна, отсутствуют комки и хлопья.

Абсорбентные свойства полимера:

- Полимер состоит из крупных частиц, и абсорбентные свойства по отношению к мономеру схожи к таковым песка и воды.
- Структурная близость полимера и мономера обеспечивает быстроту и лёгкость при замешивании.

Оттенки:

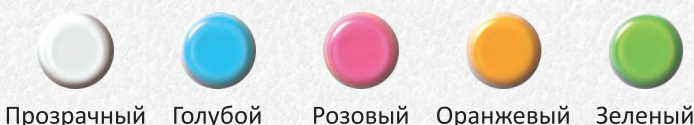

Ortho Bright



Ortho Bright

Пластмасса холодного отверждения с длительным рабочим временем для применения в ортодонтии.


Применение:

- Ортодонтические шины и прочие функциональные конструкции, создание временных протезов, индивидуальных слепочных ложек.

Свойства:

- Удобство в работе.
- Хорошая совместимость полимера и мономера.
- Простота в моделировании.
- Длительное рабочее время.
- Наиболее подходит для функционального применения в ортодонтии.

Оттенки:

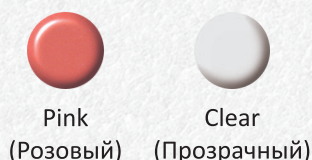

Варианты поставки: Порошок - 100г; Жидкость - 70 мл.

Набор: порошок - 100г, жидкость 70мл, мерный шприц, насадки для шприца - 3 шт., силиконовый стаканчик для замешивания, мерный стаканчик.

Pattern Bright



Pattern Bright

Самотвердеющая моделировочная беззольная пластмасса.

Описание:

Пластмасса Pattern Bright специально разработана специалистами компании YAMAHACHI DENTAL MFG (Япония) для наиболее эффективного моделирования бюгельных протезов, пластин, кламмеров, а также телескопических коронок и мостов.

Свойства:

- Низкая степень усадки при полимеризации (0,72%) - для наиболее точного моделирования.
- Время отвердевания - 3 минуты 20 секунд.
- Практически не оставляет осадка при выгорании (остаток при 700°C - 0,067%).
- Твёрдость пластмассы (13,4 Hv) способствует сохранению любых форм без изменений.
- Пластмасса может наноситься прямо на гипсовую модель.

Варианты поставки:

Набор: Порошок 100г, Жидкость 100мл, 2 силиконовых стаканчика для замешивания, кисточка, пипетка.

Пробный набор: Порошок 10г, Жидкость 10мл.

Физические свойства:

- Время полимеризации при 23°C - 200 секунд.
- Твёрдость по Виккерсу - 13,4 Hv.
- Упругость - 60 МПа
- Усадка после полимеризации - 0,05 (после 30 минут), 0,06 (после 24 часов).
- Усадка при полимеризации при 23°C - 0,72.
- Остаток при выгорании (700°C) - 0,067.



Re-fine Colour



Re-Fine Colour

Набор красителей для акриловой пластмассы Re-Fine Bright.

Описание:

- Предназначен для маскирования маталлических каркасов и конструкций с пластмассовой облицовкой.
- Используется в качестве опак под базисную пластмассу, например, в седловинной части каркаса частичных съёмных протезов.
- Подкрашивание пластмасс для изготовления коронок, имитация дефектов эмали.

Варианты поставки:

Полный набор: 3 основных оттенка - А, В, С (D) по 6г, 4 дополнительных оттенка - белый, серый, розовый, коричневый по 3г, жидкость 25мл, кисточка, пипетка. (артикул: STY-CLR-FS).

Стартовый набор: 3 оттенка - А, В, С по 6г, жидкость 25мл, кисточка, пипетка. (артикул: STY-CLR-SS).

Отдельно порошки по 3гр: оттенки - А, В, С, D, коричневый, серый, розовый, белый.

Отдельно жидкость: 25 мл.

Re-Fine Acrylic



Re-Fine Acrylic

Акриловая пластмасса (полиметилметакрилат) для изготовления временных коронок и мостов методом CAD/CAM фрезерования.

Область применения:

- Re-Fine Acrylic предназначен для изготовления функциональных и эстетических временных протезов (временных коронок и мостов), рассчитанных для использования на длительный срок.
- Позволяет быстро и экономично проверить функциональность и точность работы на модели перед фрезерованием из диоксида циркония.

Особенности:

- Позволяет создать высокоэстетичный протез.
- Легко обрабатывается.
- Экономичная альтернатива при изготовлении для литья
- Хорошая биосовместимость - идеально подходит для пациентов, страдающих аллергией.
- Высокая прочность.

Оттенки: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, C2, C3, C4, D2, W0.5 (отбеленный), CLEAR (прозрачный), LF-PINK (Розовый с прожилками).

Форма: Диск.



Система:

Базовая заготовка:

Высота: мм - 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 25.
Диаметр - 98.5мм.

Заготовка для Zirkonzahn:

Высота: мм - 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22.
Диаметр - 95мм.

Заготовка для Amann Girrbach:

Высота, мм - 13, 20.
Диаметр - 101мм.

Базовая



Ф98.5мм

Zirkonzahn




Ф95мм

Amann Girrbach



Ф101мм

Цветовая палитра YAMAHACHI (оттенки доступные к заказу)

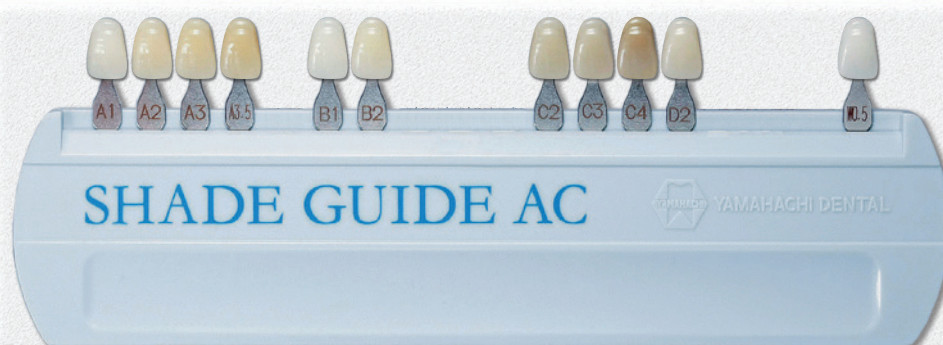

CLEAR
(Прозрачный)



LF PINK
(Розовый с
прожилками)

⚠ При заказе ориентируйтесь по диаметру, высоте и оттенку.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в спецификацию, дизайн, ценообразование моделей и элементов комплектации, проиллюстрированных и описанных в этой публикации, в любое время, без каких-либо обязательств и предоставления уведомления о таком изменении. Все технические характеристики, указанные здесь, могут отличаться от фактических характеристик продукта. Все сочетания цветов и моделей доступны при условии фактического наличия.

YAMAHACHI DENTAL MFG. CO.

Re-Fine Acrylic (многослойные)



Re-Fine Acrylic (многослойные)

Многослойная, предокрашенная акриловая пластмасса (полиметилметакрилат) для изготовления временных коронок и мостов методом CAD/CAM фрезерования.

Область применения:

- Re-Fine Acrylic предназначен для изготовления функциональных и эстетических временных протезов (временных коронок и мостов), рассчитанных для использования на длительный срок.

Особенности:

- Плавный переход оттенка от цервикальной части к режущему краю.
- За счет цветовой градации в готовом протезе сочетается максимальная эстетика и индентичность натуральному зубу.
- Легко обрабатывается.
- Экономичная альтернатива при изготовлении для литья
- Хорошая биосовместимость - идеально подходит для пациентов, страдающих аллергиями.
- Высокая прочность.

Система:

Базовая заготовка:

Высота: мм - 20.

Диаметр - 98.5мм.

Для оттенка A3-VPink:

Высота: мм - 35.

Диаметр - 98.5мм.

Базовая




Ф98.5мм

Оттенки:

A1+, A2+, A3+, A3.5+, B1+, A3-VPink.

Форма: Диск.

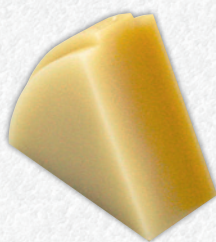

Плавный переход оттенка от цервикальной части к режущему краю.



Оттенок A3-VPink:


Высота: мм - 35. Диаметр - 98.5мм.

Максимальная эстетика за счет 3-х слоёв:

- Коронковая часть, оттенок A3
- Сепарирующая часть, смешение оттенков A3 и Vpink (розовый с прожилками)
- Базисная часть, оттенок Vpink (розовый с прожилками)



Carving Wax disk

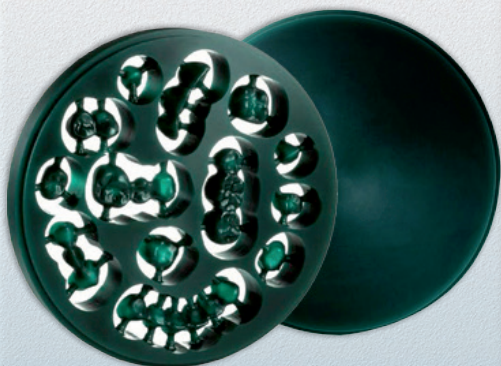

Carving Wax disk

Воск фрезеровочный для изготовления восковых моделей по технологии CAD/CAM.



Цвета: Зеленый, бежевый.



Система:

Базовая заготовка:

Высота: мм - 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 25.

Диаметр - 98мм.

Заготовка для Zirkonzahn:


Высота: мм - 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 25.

Диаметр - 95мм.

Заготовка для Amann Girrbach:

Высота, мм - 13, 20.

Диаметр - 101мм.

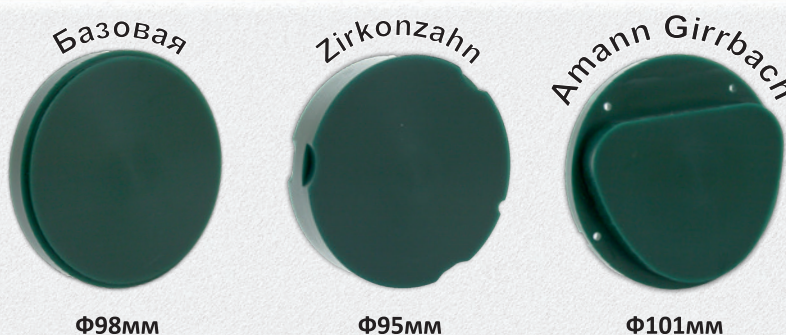

Wax Disk Alpha



Wax Disk Alpha

Воск фрезеровочный для изготовления восковых моделей по технологии CAD/CAM.

Преимущества:

Wax Disk Alpha аналогичен стандартному зеленому Wax Disk, но в его использовании есть следующие преимущества:

- При использовании Alpha возможна ручная проработка деталей после процесса фрезеровки (он мягче, чем зеленый Wax Disk, поэтому техник может легко дополнить или проработать детали инструментом для воска).

- Некоторые паковочные массы нагреваются очень быстро, иногда этот нагрев может вызвать трещины на восковой модели.

Используя диски Alpha, Вы решите данную проблему.

Примечание: необходимо оставлять расстояние как минимум 2 мм между каждой восковой моделью на диске.

- Как и стандартный зеленый Wax Disk, Alpha также хорошо сгорает и не оставляет остатков материала.
- Коэффициент теплового расширения 0.033 мм / °C позволяет создать высокоэстетичный протез.

Система:

Базовая заготовка:

Высота: мм - 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20.

Диаметр - 98мм.

Заготовка для Zirkonzahn:


Высота: мм - 12, 14, 15, 16, 18, 20.

Диаметр - 95мм.

Заготовка для Amann Girrbach:

Высота, мм - 13, 20.

Диаметр - 101мм.

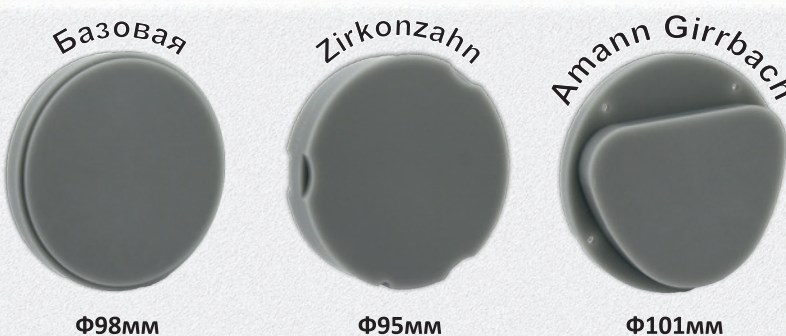

⚠ При заказе ориентируйтесь по диаметру, высоте и оттенку.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в спецификацию, дизайн, ценообразование моделей и элементов комплектации, проиллюстрированных и описанных в этой публикации, в любое время, без каких-либо обязательств и предоставления уведомления о таком изменении. Все технические характеристики, указанные здесь, могут отличаться от фактических характеристик продукта. Все сочетания цветов и моделей доступны при условии фактического наличия.

YAMAHACHI DENTAL MFG. CO.

Dipping Wax



Цвета: Желтый. **Вес:** 200 грамм.

Dipping Wax

Погружной воск в гранулах.

Особенности:

- Высочайшая точность благодаря минимальной усадке.
- Оптимальная вязкость при 80-90°C.
- Равномерная толщина стенок колпачка.
- Высокая прочность и эластичность.
- Без пластмассовых добавок.
- Обладает памятью.
- Легкость обрезки по границе препарирования.
- Гранулированная форма облегчает дозирование

Толщина колпачка в зависимости от температуры плавления:

Температура (°C)	80	85	90
Толщина колпачка (мм)	0,57	0,49	0,45
Время погружения	0,5 сек		

Pro Line Wax



Pro Line Wax

Воск литьевой в прутках, используется в технологии литья сплавов.

Описание:

- Восковые прутки Pro Line могут быть использованы для отливки коронок, мостов и вкладок, моделирования протезов и кламмеров.
- Прутья Pro Line очень трудно поломать даже при множественном сгибании. Ровная поверхность обеспечивает наилучшие условия для течения металла.

Форма и упаковка восковых прутков Pro Line Wax:

№	Форма	Толщина	Высота	Основное применение	Упаковка (шт/уп)
YR 05	•	(0.5)	—	Ретейнеры для бюгелей, коронок и мостов	120
YR 07	•	(0.7)	—		120
YR 10	•	(1.0)	—		120
YR 12	•	(1.2)	—	Литники для коронок, мостов и вкладок	120
YR 15	•	(1.5)	—		120
YR 20	•	(2.0)	—		120
YR 25	•	(2.5)	—		60
YR 32	•	(3.2)	—	Литники для бюгелей	30
YR 35	•	(3.5)	—		30
YR 40	•	(4.0)	—		30
YR 50	•	(5.0)	—		12
YR 60	•	(6.0)	—		10

Pro Line Wax



Pro Line Wax

Восковая проволока литьевая, используется в технологии литья сплавов.

Цвет: Синий.

Диаметр: 3,2 мм, 3,5 мм, 4,0 мм, 5,0 мм, 6,0 мм.

Варианты поставки: 250 г.

⚠ При заказе ориентируйтесь по наименованию, форме и толщине.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в спецификацию, дизайн, ценообразование моделей и элементов комплектации, проиллюстрированных и описанных в этой публикации, в любое время, без каких-либо обязательств и предоставления уведомления о таком изменении. Все технические характеристики, указанные здесь, могут отличаться от фактических характеристик продукта. Все сочетания цветов и моделей доступны при условии фактического наличия.

Paraffin Wax



Paraffin Wax

Воск базисный.

Свойства:

- Возможен выбор необходимой степени твердости в соответствии с областью применения и окружающей средой (Soft - мягкий, Medium - средний, Hard - твердый).
- Воск обладает оптимальной упругостью и пластичностью.
- Прекрасно удерживает искусственные зубы при моделировании.

Размер:

Стандартный размер.

- Длина листа: 146 мм.
- Ширина листа: 74 мм.
- Толщина листа: 1,4 мм (стандартный).

Увеличенный размер.

- Длина листа: 170 мм.
- Ширина листа: 85 мм.
- Толщина листа: 1,4 мм.

Варианты поставки: 500 г/1000 г.

Kolben Wax



Kolben Wax

Воск для формирования краёв базиса.

Особенности:

- Экономия времени при моделировании краёв базисного протеза.
- Простота в использовании и моделировании.

Размер:

- Диаметр: 2,2 мм.
- Длина: 200 мм.

Варианты поставки: 500 прутков.

Bite Rim Stick



Bite Rim Stick

Воск прикусной для постановки зубов на базисном протезе.

Свойства:

- Особая форма валика для более удобной постановки на альвеолярном гребне заготовки базисного протеза.
- Экономия времени и воска - одного валика длиной 25 см достаточно для построения прикуса на двух базисных протезах.


Размер:

S и L

Длина: 25 см.

Варианты поставки:

50 шт.

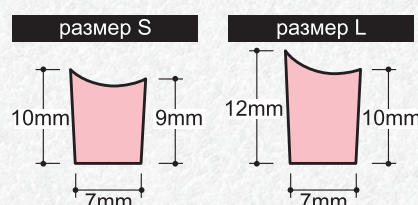

Carving Wax



Форма: Цилиндр.

Варианты поставки: Цилиндр 50г.

Carving Wax

Воск моделировочный.

Применение:

- Моделирование вкладок, коронок и мостов.

Свойства:

- Не поддается воздействию температуры рабочей среды, возможно использование во все времена года.
- Не крошится.
- Стружки не прилипают к рукам и инструментам.
- Низкий коэффициент термического расширения.
- Незначительный уровень осадка при выплавлении.
- Малая степень прозрачности.
- Стойкость цвета.

Оттенки: Бежевый, Серый, Красный, Синий, Зелёный.

Pro Utility Wax



Pro Utility Wax

Воск общего применения.

Свойства:

- Великолепные физические характеристики, мягкий, простой в обращении и моделировании.
- Два типа твёрдости: Мягкий и Жёсткий.

Размеры:

- Длинные прутья: 5мм x 280мм.
- Короткие прутья: 5мм x 140мм.

Цвет: Красный.

Варианты поставки: 125 г.

Pro Line Wax



Применение:

- Применяется для моделирования моделей и литниковых систем в технологии инъекционного литья термопластмасс.
- Более мягкий по сравнению с воском для литья сплавов.

Pro Line Wax

Воск литевой в прутках, предназначен для использования в технологии инъекционного литья термопластмасс.

№	Форма	Толщина	Высота	Упаковка (шт/уп)
YR 05	•	(0.5)	—	120
YR 07	•	(0.7)	—	120
YR 10	•	(1.0)	—	120
YR 12	•	(1.2)	—	120
YR 15	•	(1.5)	—	120
YR 20	•	(2.0)	—	120
YR 25	•	(2.5)	—	60
YR 32	•	(3.2)	—	30
YR 35	•	(3.5)	—	30
YR 40	•	(4.0)	—	30
YR 50	•	(5.0)	—	12
YR 60	•	(6.0)	—	10

Rolling Wax



Rolling Wax

Восковая проволока в катушках, применяемая в технологии инъекционного литья термопластмасс.

Диаметр: 3,2 мм, 3,5 мм, 4,0 мм.

Вес: 250 г.

Диаметр: 5,0 мм, 6,0 мм, 7,0 мм.

Вес: 270 г.

Pro Line Wax



Pro Line Wax

Восковая проволока в катушках, применяемая в технологии инъекционного литья термопластмасс.

Цвет: Красный.

Диаметр: 3,2 мм, 3,5 мм, 4,0 мм, 5,0 мм, 6,0 мм.

Варианты поставки: 250 г.



АБРАЗИВНЫЕ И ПОЛИРОВОЧНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ

Twister Big



Twister Big

Силиконовые полиры.


Свойства:

- Медленный и равномерный износ при великолепных полировочных свойствах.
- Ассортимент из 7 типов.

Обороты:


- Максимальные рабочие обороты - 15 000 об/мин.

Упаковка: 10 шт.

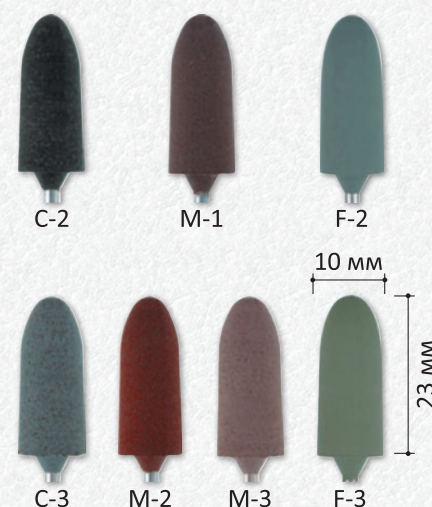

Артикул	Тип	Полировка	Цвет	Жесткость
STYTB-C2-10	C-2	Грубая обработка изделий из композитов	Чёрный	Средний
STYTB-C3-10	C-3	Грубая обработка изделий из акрила	Серый	Мягкий
STYTB-M1-10	M-1	Промежуточная обработка изделий из сплавов	Тёмно-коричневый	Твёрдый
STYTB-M2-10	M-2	Промежуточная обработка изделий из композитов	Коричневый	Средний
STYTB-M3-10	M-3	Промежуточная обработка изделий из акрила	Светло-коричневый	Мягкий
STYTB-F2-10	F-2	Финишная обработка изделий из композитов	Зелёный	Средний
STYTB-F3-10	F-3	Финишная обработка изделий из акрила	Светло-зелёный	Мягкий

Twister Wheel

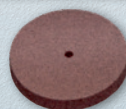

Twister Wheel

Силиконовые диски.


Свойства:

- Медленный и равномерный износ при великолепных полировочных свойствах.
- Ассортимент из 7 типов.

Обороты:



- Максимальные рабочие обороты - 15 000 об/мин.

Упаковка: 20 шт.

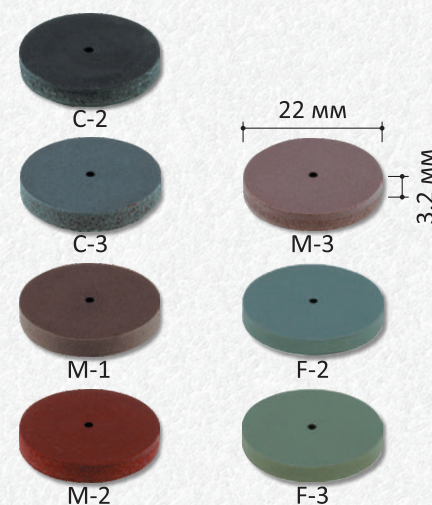

Артикул	Тип	Полировка	Цвет	Жесткость
STYTW-C2-20	C-2	Грубая обработка изделий из композитов	Чёрный	Средний
STYTW-C3-20	C-3	Грубая обработка изделий из акрила	Серый	Мягкий
STYTW-M1-20	M-1	Промежуточная обработка изделий из сплавов	Тёмно-коричневый	Твёрдый
STYTW-M2-20	M-2	Промежуточная обработка изделий из композитов	Коричневый	Средний
STYTW-M3-20	M-3	Промежуточная обработка изделий из акрила	Светло-коричневый	Мягкий
STYTW-F2-20	F-2	Финишная обработка изделий из композитов	Зелёный	Средний
STYTW-F3-20	F-3	Финишная обработка изделий из акрила	Светло-зелёный	Мягкий

Silicone Points

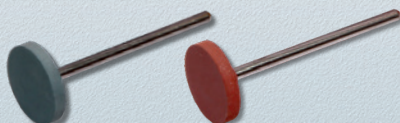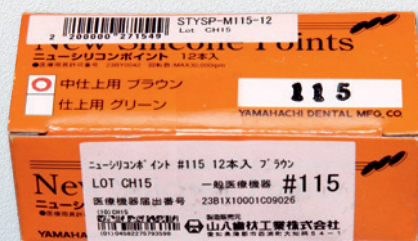

Silicone Points

Силиконовые полиры для предварительной обработки металлов и пластмассы.

Обороты:

- Максимальные рабочие обороты - 30 000 об/мин., (15 000 об/мин для №162).

Применение:

- Финишная обработка - полиры зеленого цвета.
- Предварительная обработка - полиры коричневого цвета.

Артикул:

STYSP-F10/11/13/13S/28/162/114/115. F-финишная обработка.

STYSP-M10/11/13/13S/28/162/114/115. M-предварительная обработка.

Таблица форм и обозначений

Форма								
№	10	11	13	13S	28	162	114	115

Варианты поставки: 1шт / 12шт / 72 шт.

Dream Points



Dream Points

Полиры для грубой и средней полировки.

Особенности:

- Полиры на основе карборунда и оксида алюминия обладают полировочными свойствами, равными карборундовым и алмазным инструментам.
- Dream Points позволяют экономить время, так как один полир может использоваться для единого процесса от грубой до средней полировки.

Обороты:

- Максимальные рабочие обороты - 30 000 об/мин.

Артикул: №1 STY-DrP/#1; №2 STY-DrP/#2; №3 STY-DrP/#3;

Таблица форм и размеров

Форма			
Размер	№1	№2	№3

Упаковка: 6шт. / 1шт.

Urethane Big



Urethane Big

Полиры для полировки протезов из мягких пластмасс, а также кап и ортодонтических шин.

Обороты:


- Максимальные рабочие обороты - 15 000 об/мин.

Упаковка: 10шт. / 1шт.





Urethane Disk

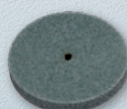

Urethane Disk

Полиры для полировки протезов из мягких пластмасс, а также капп и ортодонтических шин.

Обороты:

- Максимальные рабочие обороты - 15 000 об/мин.


Упаковка: 20шт.

Цвет: синий / зеленый.

Абразивность: #100 (грубый) / #320 (средний).



Silicone Wheel-ST

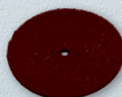

Silicone Wheel-ST

Диски для предварительной полировки сплавов.

Особенности:

- Отличные полировочные свойства.
- Толщина диска 1,0 мм способствует более эффективной обработки деталей и труднодоступных мест.
- Подходит для всех типов металла.

Обороты:

- Максимальные рабочие обороты - 15 000 об/мин.

Упаковка: 25 шт.

Артикул: STY-SIW-ST.

Creamy Sand



Creamy Sand

Порошок для предварительной полировки акриловых пластмасс.

Особенности:

- Мелкодисперсный порошок оксида алюминия способствует наиболее эффективной полировке.
- При смешивании порошка с водой достигается пастообразное состояние, для удобной и эффективной полировки.
- В результате особой обработки материала при производстве, паста легко очищается от рабочих инструментов и приборов, и не оставляет маслянистых следов.
- Паста может применяться для предварительной полировки различных материалов - от пластмассы до металла.
- С применением Creamy Sand время полировки уменьшается вдвое, при этом вы получаете блеск и чистоту обрабатываемой поверхности.

Артикул: STYCRS/100 g, STYCRS/3 kg.

Варианты поставки: 100 г, 3 кг.

Tiger Multi



Tiger Multi

Паста для полировки акриловых пластмасс, сплавов из титана, сплавов из металла, светоотверждаемых композитов.

Особенности:

- Мелкодисперсный порошок оксида алюминия способствует наиболее эффективной финишной полировке акриловых пластмасс.
- Благодаря своей структуре и свойствам не оставляет маслянистых следов.
- Паста также может применяться для предварительной полировки различных материалов - керамики, металла.
- За счет густой консистенции паста удерживается на фельце, что делает процесс полировки более эффективным и качественным.
- Не имеет запаха.

Варианты поставки: брикет - 400 г.

Артикул: STUTIM.

Blue Shine



Blue Shine

Паста для финишной полировки пластмассы.

Особенности:

- Паста для полировки протезов, изготовленных из всех видов пластмасс термопластмасс.
- Быстрая и эффективная полировка композитных и акриловых пластмасс.
- Blue Shine создаёт глянцевую ровную поверхность при минимуме усилий.
- За счет густой консистенции паста удерживается на фельце, что делает процесс полировки более эффективным и качественным.
- Не имеет запаха.

Варианты поставки: 50 г, 300 г.

Артикул: STYBS/50 г. STYBS/300 г.



Glaze Powder



Glaze Powder

Порошок для финишной и эстетической полировки гибких (нейлоновых) базисных протезов, в том числе и из полипропиленовой термопластмассы Basis ST.

Особенности:

- Позволяет провести этап финишной полировки за короткое время (7-10 мин. при оборотах 3500-4000 об/мин).
- Позволяет добиться эстетического блеска в течении 10 минут после этапа финишной полировки.
- При смешивании порошка с водой достигается пастообразное состояние, для удобной и эффективной полировки.

Варианты поставки:

100г. / 1,5 кг.

Артикул: STYGP/1.5 kg.
STYGP/100 g.



До полировки



После полировки

MP Powder



MP Powder

Порошок для промежуточной и финишной обработки поликарбонатных, полипропиленовых и акриловых пластмасс.

Особенности:

- При смешивании порошка с водой достигается пастообразное состояние, для удобной и эффективной полировки.

Упаковка: 1 кг.

Артикул: STYMP/1 kg.



Cutting Disk



Cutting Disk

Диски отрезные для металла.

Артикул	Тип	Размер, мм.	Упаковка, шт.
STY-CUTD-A	A	25 x 0,35	10
STY-CUTD-B	B	25 x 0,60	10
STY-CUTD-C	C	38 x 0,60	10
STY-CUTD-E	E	22 x 0,23	10

Обороты:

- Максимальные рабочие обороты - 15 000 об/мин.



СЕПАРАЦИОННЫЕ И ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА

Cera Sep



Варианты поставки: 20 мл.

Артикул: STYCS.

Cera Sep

Сепарационная жидкость для керамики.

Область применения:

- Изоляция керамики от гипса, керамики от силикона (при работе с силиконовым ключом).
- Рекомендуется к использованию для маргинальных краев, колпачков зубов антагонистов и других гипсовых элементов, контактирующих с керамикой.

Основные свойства:

- Достаточно нанесения даже одного слоя.
- Быстро высыхает.
- Не содержит силикона (не остается на поверхности керамики и, как следствие, не влияет на её свойства в процессе обжига).
- Не приводит к преждевременному износу ворса на моделировочной кисточке, так как не содержит силикона.
- Полностью впитывается, не оставляя пленки на гипсе и не изменяя характеристик гипса.
- Не оказывает влияния на свойства керамической массы.

Apollon Varnish



Варианты поставки: 100 мл.

Артикул: STYAV.

Apollon Varnish

Сепарационная жидкость для восковых моделей.

Область применения:

- Изготовление восковых колпачков, культовых вкладок, инлеев, онлеев, виниров, пресс - керамики.
- Изготовление восковых колпачков на абатменты.
- Изготовление вторичных колпачков на телескопические конструкции.
- Работа с замковыми соединениями.

Основные свойства:

- Отлично изолирует воск от гипса, воск от металла.
- Не остается на внутренней поверхности колпачков, обеспечивая гладкую поверхность литья или пресс - керамики.
- Сохраняет свои разделяющие свойства на нанесенной поверхности в течении нескольких дней, нет необходимости повторной обработки гипсовой модели.
- Нет необходимости обработки гипса отвердителем гипса.
- Великолепно впитывается в гипс, не оставляя пленки и не изменяя прочность гипса.

Wax Pattern Cleaner Aqua



Wax Pattern Cleaner Aqua

Жидкость для снятия поверхностного напряжения с восковых моделей.

Область применения:

- Точное нанесение тонким слоем перед паковкой с помощью спрея создает водонепроницаемую поверхность на восковой модели, облегчает течение паковочных масс, обеспечивает возможность оттиска самых мелких деталей, предотвращает образование пузырьков воздуха во время литья.
- Рекомендуется при моделировании коронок, мостов и бюгельных протезов.

Варианты поставки: Жидкость 250 мл.

Артикул: STYWPCA-0250LClear, STYWPCA-0250LPink.

Sepa Emulsion



Варианты поставки: 100 мл.
Артикул: STYSE.

Sepa Emulsion

Жидкость для изоляции воска от гипса. Не содержит спирта.

Область применения:

Идеально подходит для изготовления:

- Восковых колпачков, культевых вкладок, инлеев или онлеев, виниров. Великолепно зарекомендовал себя в технике изготовления пресс-керамики.

Основные свойства:

- Не содержит спирта и, как следствие, не растворяет восковую репродукцию.
- Не остается на внутренней поверхности колпачков, обеспечивая гладкую поверхность литья или пресс-керамики.
- Сохраняет свои разделяющие свойства на нанесенной поверхности в течении нескольких дней, нет необходимости повторной обработки гипсовой модели.
- Нет необходимости обработки гипса отвердителем гипса («закалочная ванна»).
- Великолепно впитывается в гипс, не оставляя пленки и не изменяя прочность гипса.

Apollon Sep



Варианты поставки: 40; 500; 2000 мл.
Артикул: STYAS-40, STYAS, STYAS-2L.

Apollon Sep

Жидкость для изоляции гипса от гипса, гипса от пластмассы.

Область применения:

Рекомендуем разводить один к двум проточной водой.

- Сепарационная жидкость для применения при изготовлении базисных протезов, а также для иных работ, где требуется равномерное и четкое разделение гипса и пластмассы.
- Apollon Sep также эффективен при изоляции гипса от поверхности кюветы.

Отличительные свойства:

- Основной ингредиент - раствор содового альгината.
- Достаточно нанесения одного слоя.
- Равномерное распределение сепаратора по обрабатываемой поверхности.
- Очень чистый препарат.
- Может наноситься как на холодную, так и на горячую модель.

Apollon Sep LV



Apollon Sep LV

Жидкость высокой текучести для изоляции пластмассы от гипса, гипса от гипса.

Область применения:

Разводить не рекомендуем.

- Обладает всеми свойствами Apollon Sep.
- Для более эффективного нанесения рекомендуем использовать флакон с распылителем для сепарационной жидкости Apollon Sep LV.

Варианты поставки: 40 мл, 500мл, 2000 мл.

Артикул: STYAS-LV-40, STYAS-LV, STYAS-LV-2L.

Discolouring Break



Discolouring Break

Растворитель гипса, паковочной массы, альгината.

Цвет: Розовый.

Концентрат: разводится проточной водой в соотношении 1:3.

Отличительные особенности:

- Цвет жидкости является индикатором её эффективности (в зависимости от количества растворённого гипса жидкость меняет цвет, поэтому в процессе работы вы легко можете судить о её дальнейшей способности растворения).
- В то время, как остальные средства подобного рода оставляют белый осадок, данная жидкость растворяет гипс, не вызывая осадка и загрязнений, поэтому её можно неоднократно использовать в течение долгого времени.
- Подходит для работы с любыми металлами и пластмассами, применяющимися в стоматологии.
- Также подходит для удаления альгината и гипса.

Варианты поставки: 1000 мл, 2000 мл.

Артикул: STYDB, STYDB-2L.

Способ применения:

1. После распаковки промойте протез водой, удалите излишки материала и влаги.
2. При низкой температуре рекомендуется нагревать жидкость до 20 градусов. Чтобы ускорить процесс растворения гипса, рекомендуется использовать ультразвуковую ванну или нагревать жидкость до 40 градусов.
3. По изменению цвета жидкости можно судить о способности дальнейшего растворения. Если жидкость становится лиловой или оранжевой, её ещё можно использовать; если жидкость становится светло-оранжевой или бесцветной, её способность растворения снижается. В этом случае рекомендуется воспользоваться новой жидкостью.
4. Если опустить в раствор слепочную ложку с остатками гипса, они размягчатся и их можно легко удалить щёткой.
5. После удаления гипса хорошо промойте протез, слепочную ложку, штифты (довелпины) водой.
6. После использования жидкости храните её в закрытом виде в прохладном тёмном месте, таким образом её можно будет неоднократно использовать в течение долгого времени.
7. Возможно возникновение осадка, однако он не повлияет на качество продукта.

Меры предосторожности:

1. Данный продукт нельзя употреблять внутрь и рекомендуется хранить подальше от детей.
2. Не используйте продукт в целях, не указанных в инструкции.
3. В случае попадания жидкости на кожу, промойте пораженное место водой.
4. В случае попадания жидкости внутрь, вызовите рвотный рефлекс.
5. В случае попадания жидкости в глаза, промойте их водой. По необходимости обратитесь к врачу.
6. Рекомендуется хранить данный продукт в тёмном прохладном месте, не допуская попадания прямых солнечных лучей.

Flask Cleaner



Flask Cleaner

Растворитель неспечённой паковочной массы и гипса.

Цвет: Прозрачный.

Концентрат: разводится проточной водой в соотношении 1:3.

Область применения:

- Растворитель-концентрат для гипса, неспечённой паковочной массы, подходит для очистки металлических опок.

Варианты поставки: 2000 мл.

Артикул: STYFC-2L.



Зуботехническая лаборатория

ATRIDENT

Зуботехническая лаборатория «Атридент»

Добрый день, уважаемые доктора и зубные техники.

Меня зовут **Константин Шайбаков**. Я - зубной техник с многолетним опытом работы и управляющий зуботехнической лабораторией «Атридент», специализирующейся на изготовлении ортопедических и ортодонтических конструкций высочайшего качества. Мы объединяем передовые технологии, опыт квалифицированных специалистов и строгий контроль на каждом этапе производства, чтобы обеспечить пациентам безупречный результат.

Что мы изготавливаем:

- Коронки (металлокерамическая, циркониевая, цельнокерамическая).
- Виниры и люминиры.
- Мостовидные конструкции любой сложности.
- Съёмные и условно-съёмные протезы.
- Временные конструкции.
- Ортодонтические аппараты и каппы.
- Индивидуальные абатменты и элементы имплантологии.

Врачи выбирают нас!

Цифровые технологии:

Мы работаем на CAD/CAM оборудовании, используем 3D-сканирование и современные методы моделирования. Это обеспечивает точность и предсказуемость результата.

Качественные материалы:

Применяем сертифицированные материалы от ведущих мировых производителей — для надёжности, эстетики и долговечности конструкций.

Контроль на каждом этапе:

Каждое изделие проходит многоступенчатую проверку: от первичного моделирования до финальной проверки. Это исключает любые дефекты и обеспечивает комфорт для пациента.

Индивидуальный подход:

Мы учитываем клинические задачи врача и особенности пациента, чтобы результат полностью соответствовал ожиданиям.

Соблюдение сроков:

Мы понимаем, насколько важны сроки для клиники, поэтому процессы в лаборатории выстроены чётко и без компромиссов по качеству.

Руководитель лаборатории «Атридент»




Шайбаков Константин Андреевич

Лучшее оборудование и материалы



Исключительная точность в работе

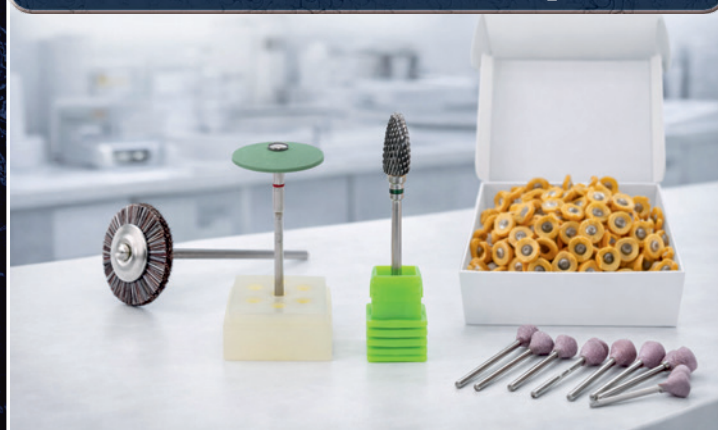

+7 (499) 745-63-06



+7 (925) 255-67-54



г. Москва, Ленинградское шоссе, дом № 96 А



lab.a3-dent.ru



lab@a3-dent.ru



Ред. №5 Август 2026г.



YAMANASHI
DENTAL MFG. CO.

Наш партнёр в РФ



интернет-магазин a3-dent.ru
оборудование и материалы
для стоматологии

A3-DENT.RU

ООО «Атридент» 125195, г. Москва,

Ленинградское шоссе, д. 96А.
Тел./Факс: +7 (499) 745-63-01
E-mail: shop@a3-dent.ru
Сайт: www.a3-dent.ru



Наш партнёр в Казахстане



Atri

стоматологические материалы

ТОО «Атри» г. Алматы, ул. Макатаева 117, лит А,

офис 424 (Бизнес-центр "LOTOS").
Тел. городской: +7. (727) 339-05-72
Тел. сотовый: +7 (771) 747-99-05
E-mail: shop@atri.kz, Сайт: www.atri.kz



Дентал-Ист

Стоматологические
материалы и оборудование

ООО «Дентал-Ист» 125195, г. Москва,

Ленинградское шоссе, д. 96А.
Тел./Факс: +7 (499) 745-63-20
E-mail: shop@dental-east.ru
Сайт: www.dental-east.ru

